

CA·MI

# Italian Medical Touch

SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA

DIAGNOSTICA | BENESSERE

ASPIRAZIONE CHIRURGICA

# CATALOGO 2016/17

# PROFILO AZIENDALE

CA-MI è un'azienda a conduzione familiare fondata nei primi anni '80 e dedicata alla produzione di elettromedicali come ASPIRATORI CHIRURGICI per l'aspirazione di liquidi corporei umani ed animali, utilizzati in ambito domiciliare, ospedaliero, emergenza ed estetico professionale, SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA indicati nel trattamento di patologie respiratorie, INALATORI TERMALI per trattamenti caldo-umido delle vie aeree superiori.

A completamento della gamma la CA-MI offre altri dispositivi medici quali diagnostici per la misurazione della pressione e della temperatura, TENS e prodotti antidecubito.

Grazie all'esperienza ed il know-how raggiunti in oltre trent'anni di attività, la CA-MI esporta oggi in oltre 90 paesi fornendo risposte esaurienti agli operatori medici professionali. La recente acquisizione di stabilimenti più grandi in provincia di Parma ha reso possibile l'aumento della capacità produttiva e logistica per poter soddisfare la crescente domanda dei propri prodotti.

Gli aspiratori chirurgici e sistemi per aerosolterapia sono disegnati, progettati e realizzati internamente alla CA-MI; disponibili in vari modelli con configurazioni e prestazioni per soddisfare ogni possibile applicazione nel campo medico dell'aspirazione e dell'aerosolterapia.

La clientela è la benvenuta ad incontrare i reparti commerciali CA-MI in occasione delle principali fiere nazionali quali EXPOSANITA e COSMOFARMA dove l'intera gamma di dispositivi medici è in esposizione.

## QUALITA' e CERTIFICAZIONI

Potendo contare su propri reparti interni di Ricerca e Sviluppo, nonché di design e progettazione, gli aspiratori e i sistemi per aerosolterapia CA-MI sono prodotti in Italia utilizzando materiali di ultima generazione ed altamente resistenti, in conformità alle normative EN ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2012 / AC:2012 e riportano la marcatura CE 0123 certificato dall'Ente Notificato tedesco TUV SÜD Product Service GmbH.

Questi stessi standard di alta qualità hanno recentemente permesso alla CA-MI di certificare i propri aspiratori in conformità alla più recente normativa EN 60601-1-11 "Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prescrizioni essenziali - Norma Collaterale: Prescrizioni per apparecchi elettromedicali e sistemi elettromedicali per uso domiciliare" e di classificarli IP21, cioè "il grado di protezione di un'apparecchiatura elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con il corpo umano o con oggetti, e la protezione contro il contatto con l'acqua".

CLASSI DI RISCHIO (MDD 93/42/EEC)

**Dispositivi medici di Classe IIa:** Aspiratori chirurgici, sistemi per aerosolterapia, inalatori termali, misuratori di pressione, termometri, pulsossimetri, TENS.

**Dispositivi medici di Classe Im:** sfigmomanometri aneroidi e palmari, vasi raccolta liquidi e sacche monouso.

**Dispositivi medici di Classe I non-sterile:** Incentivatori di respirazione, materassi antidecubito, stetoscopi.





# INDICE

## SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA

|                       |                                          |    |
|-----------------------|------------------------------------------|----|
| MINIMAX   MINIMAX 2   | Compressore a Pistone                    | 04 |
| MIKO                  | Compressore a Pistone                    | 05 |
| EOLO                  | Compressore a Pistone                    | 06 |
| COMPACT               | Compressore a Pistone                    | 07 |
| SPEEDYMED             | Compressore a Pistone Professionale      | 08 |
| CLINEB BASIC   CLINEB | Compressore a Pistone Professionale      | 09 |
| BABY                  | Aerosol a Ultrasuoni                     | 10 |
| KIWI                  | Tecnologia MESH                          | 11 |
| LITE   MOBILE         | Micro Compressori a Pistone              | 12 |
| NASO FREE             | Doccia Nasale                            | 13 |
| SET HI-FLO            | Nebulizzatore Riutilizzabile e Accessori | 14 |

## DIAGNOSTICA | BENESSERE

|                                        |                                       |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| PULMOVOL   PULMOGAIN   PULMOLIFT       | Incentivatori di Respirazione         | 14      |
| NEW VAPINAL                            | Inalatore per Acque Termali           | 15      |
| HUMI-RAINBOW   HUMI-ROUND              | Umidificatori   Olii Essenziali       | 16      |
| LINEA NISSEI                           | Misurapressione Digitali              | 17   23 |
| BO-750BT-02 (NISSEI)   O2-EASY (CA-MI) | Pulsossimetri                         | 23      |
| MY-PRESSURE 1.0   ECO-PRESSURE         | Misurapressione Digitali              | 24      |
| MY-PRESSURE 2.0                        | Misurapressione Digitale              | 25      |
| P-50   P-100   P-130   A-50   A-100    | Sfigmomanometri                       | 26      |
| S-10   S-20   S-30                     | Stetoscopi                            | 27      |
| T-FLASH   T-ONE                        | Termometri ad Infrarossi              | 28      |
| TERMIR4   T-40   T-40 F                | Termometro Infrarossi e Digitali      | 29      |
| T-CLASSIC   T-FLAP                     | Termometri Mercury Free               | 29      |
| MAGICS                                 | Magnetoterapia                        | 30      |
| MY-TENS                                | Elettrostimolatore Tens               | 30      |
| MAT 130                                | Materasso Antidecubito                | 31      |
| WITHU                                  | Allarme GSM                           | 32      |
| DÉFILÉ   SPRINT   BAMBY                | Bilance Digitali per Adulti e Neonati | 33      |
| NEW MAMILAT                            | Tiralatte Elettrico                   | 34      |

## ASPIRAZIONE CHIRURGICA

|                         |                                     |         |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| NEW ASPIRET             | Aspiratore Chirurgico               | 35      |
| NEW ASKIR 20            | Aspiratore Chirurgico               | 36      |
| NEW ASKIR 30            | Aspiratore Chirurgico               | 37      |
| NEW ASKIR 30 PROXIMITY  | Aspiratore Chirurgico con Proximity | 38      |
| NEW ASKIR 230 12V BR    | Aspiratore Chirurgico a Batteria    | 39      |
| ASKIR 36BR              | Aspiratore Chirurgico a Batteria    | 40      |
| ASKIR 118               | Aspiratore Chirurgico da Ambulanza  | 41      |
| ASKIR 118 WM            | Aspiratore Chirurgico da Ambulanza  | 42      |
| NEW ASKIR 30 12V        | Aspiratore Chirurgico 12V           | 43      |
| NEW EMIVAC              | Aspiratore Chirurgico a Pedale      | 44      |
| ASKIR C30 BR            | Aspiratore Carrellato a Batteria    | 45      |
| ASKIR C30               | Aspiratore Carrellato               | 46      |
| NEW HOSPIVAC 350        | Aspiratore Carrellato               | 47      |
| NEW HOSPIVAC 400        | Aspiratore Carrellato               | 48      |
| NEW HOSPIVAC BR         | Aspiratore Carrellato a Batteria    | 49      |
| ACCESSORI E CONSUMABILI | Accessori e Ricambi per Aspiratori  | 50   51 |
| FLOVAC ® VASI E SACCHE  | Sistemi di Raccolta                 | 52      |
| FLOVAC ® CONFIGURAZIONI | Sistemi di Raccolta                 | 53   54 |
| FLOVAC ® ACCESSORI      | Sistemi di Raccolta                 | 55      |
| REGOLATORI DI VUOTO     | Sistemi di Regolazione              | 56   57 |

## CODICI RDM

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| CLASSIFICAZIONI CDN   RDM | 58   59 |
|---------------------------|---------|





CE 0123

MINIMAX e MINIMAX 2 sono compressori a pistone per aerosolterapia, pensati per utilizzo domiciliare, dal design compatto. Il modello MINIMAX è colorato, dotato di borsina per il trasporto dell'apparecchio, dei suoi accessori e dei medicinali.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nebulizzatore HI-FLO
- Maschera adulti con elastico
- Maschera pediatrica con elastico
- Boccheruola
- Forcella Nasale (non invasiva)
- Tubo aria
- Filtro aria
- Borsa di trasporto (solo per modello MINIMAX)
- Cavo d'alimentazione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                                              |        |         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Compressore                          | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |        |         |
| Alimentazione Standard               | 230V-50Hz                                                    |        |         |
| Potenza Assorbita                    | 170 VA                                                       |        |         |
| Pressione Massima                    | 2.5 bar                                                      | 36 psi | 250 kPa |
| Pressione Operativa                  | 1.1 bar                                                      | 16 psi | 110 kPa |
| Flusso Libero                        | 14 l/min                                                     |        |         |
| Flusso Operativo                     | 5,0 l/min                                                    |        |         |
| Neb-rate con 4 ml di soluzione       | 0,35 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)                     |        |         |
| Diametro Aerodinamico Medio di Massa | 2,44 $\mu$ m (MMAD) misurato come da EN 13544-1              |        |         |
| Frazione Respirabile (< 5 $\mu$ m)   | > 80%                                                        |        |         |
| Funzionamento                        | Ton: 20min   Toff: 40min                                     |        |         |
| Rumorosità (normativa EN 13544-1)    | 60 dBA circa                                                 |        |         |
| Peso                                 | 1,45 kg                                                      |        |         |
| Dimensioni (Apparecchio)             | cm 13 x 10 x 15                                              |        |         |
| Anni di Garanzia                     | 3                                                            |        |         |
| Cartone di Spedizione                | 6                                                            |        |         |
| Luogo di Fabbricazione               | Italia                                                       |        |         |

3 ANNI  
di GARANZIA

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CODICE

MINIMAX

MINIMAX 2

- RE 300250 ——— MINIMAX (con borsa di trasporto)  
 RE 300250/05 ——— MINIMAX 2 (senza borsa di trasporto)







CE 0123

MIKO è un compressore a pistone per aerosolterapia, pensato per utilizzo domiciliare, dal design compatto e dotato di borsina per il trasporto dell'apparecchio, dei suoi accessori e dei medicinali.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nebulizzatore HI-FLO
- Maschera adulti con elastico
- Maschera pediatrica con elastico
- Bocchervola
- Forcella Nasale (non invasiva)
- Tubo aria
- Filtro aria
- Borsa di trasporto

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                                              |          |         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Compressore                          | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |          |         |
| Alimentazione Standard               | 230V-50Hz                                                    |          |         |
| Potenza Assorbita                    | 170 VA                                                       |          |         |
| Pressione Massima                    | 2.2 bar                                                      | 32 psi   | 220 kPa |
| Pressione Operativa                  | 0.95 bar                                                     | 13.8 psi | 95 kPa  |
| Flusso Libero                        | 12 l/min                                                     |          |         |
| Flusso Operativo                     | 4,8 l/min                                                    |          |         |
| Neb-rate con 4 ml di soluzione       | 0,35 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)                     |          |         |
| Diametro Aerodinamico Medio di Massa | 2,44 $\mu$ m (MMAD) misurato come da EN 13544-1              |          |         |
| Frazione Respirabile (< 5 $\mu$ m)   | > 80%                                                        |          |         |
| Funzionamento                        | Continuo                                                     |          |         |
| Rumorosità (normativa EN 13544-1)    | 56 dBA circa                                                 |          |         |
| Peso                                 | 1,45 kg                                                      |          |         |
| Dimensioni (Apparecchio)             | cm 14 x 17 x 11                                              |          |         |
| Anni di Garanzia                     | 3                                                            |          |         |
| Cartone di Spedizione                | 6                                                            |          |         |
| Luogo di Fabbricazione               | Italia                                                       |          |         |

3 ANNI  
di GARANZIA

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CODICE

RE 300600/03 — MIKO





CE 0123

EOLO è un compressore a pistone per aerosolterapia, pensato per utilizzo domiciliare, con comoda maniglia e ampio vano per facilitarne la movimentazione insieme ai suoi accessori ed ai medicinali.

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- Nebulizzatore HI-FLO
- Maschera adulti con elastico
- Maschera pediatrica con elastico
- Boccheruola
- Forcella Nasale (non invasiva)
- Tubo aria
- Filtro aria

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                      |                                                              |        |         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Compressore                          | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |        |         |
| Alimentazione Standard               | 230V-50Hz                                                    |        |         |
| Potenza Assorbita                    | 170 VA                                                       |        |         |
| Pressione Massima                    | 2.5 bar                                                      | 36 psi | 250 kPa |
| Pressione Operativa                  | 1.1 bar                                                      | 16 psi | 110 kPa |
| Flusso Libero                        | 14 l/min                                                     |        |         |
| Flusso Operativo                     | 5 l/min                                                      |        |         |
| Neb-rate con 4 ml di soluzione       | 0,40 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)                     |        |         |
| Diametro Aerodinamico Medio di Massa | 2,44 $\mu$ m (MMAD) misurato come da EN 13544-1              |        |         |
| Frazione Respirabile (< 5 $\mu$ m)   | > 80%                                                        |        |         |
| Funzionamento                        | Continuo                                                     |        |         |
| Rumorosità (normativa EN 13544-1)    | 55 dBA circa                                                 |        |         |
| Peso                                 | 1,65 kg                                                      |        |         |
| Dimensioni (Apparecchio)             | cm 14 x 12 x 22                                              |        |         |
| Anni di Garanzia                     | 2                                                            |        |         |
| Cartone di Spedizione                | 6                                                            |        |         |
| Luogo di Fabbricazione               | Italia                                                       |        |         |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

**CODICE**

RE 300400 ————— EOLO



8 033622 540052



CE 0123

COMPACT è un dispositivo per aerosolterapia specificatamente progettato per uso domiciliare. Grazie alla tecnologia del compressore a pistone pneumatico di cui il dispositivo è dotato, sono assicurate elevate prestazioni ed affidabilità con qualsiasi genere di farmaco a somministrazione aerosolica. La comoda maniglia e la compatta tasca anteriore ne rendono facile il trasporto e il mantenimento degli accessori in dotazione.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nebulizzatore HI-FLO
- Maschera adulti con elastico
- Maschera pediatrica con elastico
- Bocchervola
- Forcella Nasale (non invasiva)
- Tubo aria
- Filtro aria

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Compressore                          | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |
| Alimentazione Standard               | 230V-50Hz - altre configurazioni disponibili a richiesta     |
| Potenza Assorbita                    | 170 VA                                                       |
| Pressione Massima                    | 3.0 bar      43.5 psi      300 kPa                           |
| Pressione Operativa                  | 1.3 bar      18.9 psi      130 kPa                           |
| Flusso Libero                        | 16 l/min                                                     |
| Flusso Operativo                     | 5.2 l/min                                                    |
| Neb-rate con 4 ml di soluzione       | 0,5 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)                      |
| Diametro Aerodinamico Medio di Massa | 3,25 $\mu$ m (MMAD) misurato come da EN 13544-1              |
| Frazione Respirabile (< 5 $\mu$ m)   | > 70%                                                        |
| Funzionamento                        | Continuo                                                     |
| Rumorosità (normativa EN 13544-1)    | 60 dBA circa                                                 |
| Peso                                 | 1,60 kg                                                      |
| Dimensioni (Apparecchio)             | cm 13,8 x 11,7 x 23,5                                        |
| Anni di Garanzia                     | 4                                                            |
| Cartone di Spedizione                | 6                                                            |
| Luogo di Fabbricazione               | Italia                                                       |

5 ANNI  
di GARANZIA

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CODICE

RE 300200 ————— COMPACT





CE 0123

NEW SPEEDYMED è un compressore a pistone per aerosolterapia, professionale, adatto per terapie intensive in cliniche o ospedali, con ampio vano per gli accessori e i farmaci.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nebulizzatore HI-FLO
- Maschera adulti con elastico
- Maschera pediatrica con elastico
- Boccheruola
- Forcella Nasale (non invasiva)
- Tubo aria
- Filtro aria

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Compressore                          | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |
| Alimentazione Standard               | 230V-50Hz - altre configurazioni disponibili a richiesta     |
| Potenza Assorbita                    | 184 VA                                                       |
| Pressione Massima                    | 2.5 bar      36 psi      250 kPa                             |
| Pressione Operativa                  | 1.30 bar      18.9 psi      130 kPa                          |
| Flusso Libero                        | 16 l/min                                                     |
| Flusso Operativo                     | 5,2 l/min                                                    |
| Neb-rate con 4 ml di soluzione       | 0,50 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)                     |
| Diametro Aerodinamico Medio di Massa | 3,25 $\mu$ m (MMAD) misurato come da EN 13544-1              |
| Frazione Respirabile (< 5 $\mu$ m)   | > 70%                                                        |
| Funzionamento                        | Continuo                                                     |
| Rumorosità (normativa EN 13544-1)    | Approx. 57 dBA                                               |
| Peso                                 | 2,25 kg                                                      |
| Dimensioni (Apparecchio)             | cm 23 x 21 x 15                                              |
| Anni di Garanzia                     | 2                                                            |
| Cartone di Spedizione                | 4                                                            |
| Luogo di Fabbricazione               | Italia                                                       |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CODICE

RE 300100 — NEW SPEEDYMED



8 033622 540038



# Clineb Basic e Clineb

DISPOSITIVO PER AEROSOLTERAPIA

9



CE 0123

CLINEB e CLINEB BASIC sono compressori a pistone per aerosolterapia, professionali, adatti per terapie intensive in cliniche o ospedali, con ampio vano per gli accessori e i farmaci. Il modello CLINEB è dotato di regolatore e indicatore di pressione.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nebulizzatore HI-FLO
- Maschera adulti con elastico
- Maschera pediatrica con elastico
- Boccheroia
- Forcella Nasale (non invasiva)

## OPTIONAL

- Tubo aria
- Filtro aria
- Cavo d'alimentazione
- Carrello REF. 27731

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                                              |          |         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Compressore                          | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |          |         |
| Alimentazione Standard               | 230V-50Hz - altre configurazioni disponibili a richiesta     |          |         |
| Potenza Assorbita                    | 184 VA                                                       |          |         |
| Pressione Massima                    | 2.5 bar                                                      | 36 psi   | 250 kPa |
| Pressione Operativa                  | 1.30 bar                                                     | 18.9 psi | 130 kPa |
| Flusso Libero                        | 16 l/min                                                     |          |         |
| Flusso Operativo                     | 5,2 l/min                                                    |          |         |
| Neb-rate con 4 ml di soluzione       | 0,50 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)                     |          |         |
| Diametro Aerodinamico Medio di Massa | 3,25 $\mu$ m (MMAD) misurato come da EN 13544-1              |          |         |
| Frazione Respirabile (< 5 $\mu$ m)   | > 70%                                                        |          |         |
| Funzionamento                        | Continuo                                                     |          |         |
| Rumorosità (normativa EN 13544-1)    | 57 dBA circa                                                 |          |         |
| Peso                                 | 2,20 kg                                                      |          |         |
| Dimensioni (Apparecchio)             | cm 25 x 19 x 16                                              |          |         |
| Anni di Garanzia                     | 2                                                            |          |         |
| Cartone di Spedizione                | 4                                                            |          |         |
| Luogo di Fabbricazione               | Italia                                                       |          |         |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CODICE

|           |              |
|-----------|--------------|
| RE 300551 | CLINEB BASIC |
| RE 300550 | CLINEB       |

CLINEB BASIC

CLINEB





Mascherina pediatrica  
profumata alla frutta

CE 0123

Baby è un aerosol a ultrasuoni compatto e pratico, indicato per uso pediatrico e per adulti. La sua silenziosità, leggerezza, rapidità di nebulizzazione e semplicità di utilizzo lo rendono un dispositivo estremamente versatile. La terapia può essere somministrata sia impugnando l'unità e avvicinando la boccheruola integrata o la maschera al viso, sia stando seduti utilizzando il supporto base e il tubo corrugato. Baby è dotato di spegnimento automatico che interviene dopo 10 minuti in caso di accensione accidentale o insufficiente raffreddamento dell'unità. Tre diverse impostazioni del flusso permettono di impostare la velocità di nebulizzazione e, quindi, il tempo di somministrazione della terapia.

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Unità principale con boccheruola integrata
- Maschera adulti con elastici di regolazione
- Mascherina pediatrica con elastici a forma di pupazetto e profumata (colori diversi in base alla disponibilità)

#### OPTIONAL

- Tubo corrugato
- Supporto base da tavolo
- Filtro aria (2x)
- Coppetta porta medicinale (10x)
- Borsa di trasporto

- Batteria ricaricabile

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza di Funzionamento           | 2,5MHz+200kHz (-100 kHz)                              |
| Alimentazione Standard               | 100-240V / 50-60Hz con alimentatore di rete integrato |
|                                      | - 12V DC con batteria ricaricabile (Optional)         |
| Potenza Assorbita                    | 10 VA                                                 |
| (con alimentatore di rete)           |                                                       |
| Rumorosità (normativa EN 13544-1)    | 40 dBA                                                |
| Capacità massima Coppette Medicinale | 7,5 ml                                                |
| Spegnimento Automatico               | 11 min (+/- 2 min)                                    |
| Velocità di Nebulizzazione           | max 0.7ml/min con soluzione salina                    |
| Diametro Particelle                  | 1-10µm                                                |
| Funzionamento                        | Ton: 30min   Toff: 30min                              |
| Dimensioni (Apparecchio)             | cm 6 x 11 x 16                                        |
| Peso                                 | 220 gr                                                |
| Anni di Garanzia                     | 2                                                     |
| Cartone di Spedizione                | 6                                                     |

#### CODICE

RE 300900/02 ————— BABY



8 033622 540083



- Camera di nebulizzazione in PSU, speciale materiale antiurto, autoclavabile e BPA free
- Volume non nebulizzato inferiore a 0.1 ml
- Due ore di autonomia con un set di batterie alcaline
- Corpo resistente alle cadute accidentali
- Prodotto in configurazione "Full Optional"

CE 0123

KIWI è un dispositivo per aerosolterapia funzionante a tecnologia MESH di nuova generazione. Il principio di nebulizzazione su cui si basa, permette all'utilizzatore di avere disponibili in un unico dispositivo le migliori caratteristiche della tecnologia a compressore (nebulizzazione rapida ed efficace di ogni tipo di farmaco) e di quella ad ultrasuoni (silenziosità assoluta e doppia possibilità di alimentazione, a rete e a batteria) rendendolo ideale per ogni tipo di utilizzo su adulti e bambini, sia in home-care sia in emergenza durante viaggi o all'aperto. Ma a tutto questo si aggiungono caratteristiche costruttive e operative sviluppate in fase di progettazione per essere uniche nel suo genere. La camera di nebulizzazione e contenimento farmaco è costruita in PSU (polisulfone), materiale speciale che garantisce la massima resistenza all'urto e alla caduta oltre che la sterilizzazione completa anche in autoclave. Oltre 2 ore di autonomia con batterie alcaline nuove, (la più elevata disponibile sul mercato). Disco MESH in NI-Pd, materiale speciale che assicura durata e funzionalità del prodotto nel lungo periodo. Speciale design della camera di nebulizzazione che assicura la massima efficacia terapeutica riducendo a meno di 0.1 ml il volume di farmaco non nebulizzabile (il più basso sul mercato).

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Unità Principale con camera di nebulizzazione staccabile a MESH integrato
- Maschera Adulti
- Maschera Pediatrica
- Boccheruola
- Alimentatore 100-240V 50/60Hz
- Borsa di trasporto

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo di funzionamento                            | MESH vibrante                                     |
| Frequenza Vibrazione MESH                        | 108 kHz                                           |
| Alimentazione                                    | Alimentatore switching 100-240V 50/60Hz           |
|                                                  | 2 batterie alcaline tipo AA - 1.5V                |
| Durata delle batterie                            | 2 ore (con batterie alcaline in piena efficienza) |
| Potenza Assorbita                                | 0.8 W                                             |
| Rumorosità                                       | 40 dBA                                            |
| Capacità Massima Medicinale                      | >8 ml                                             |
| Velocità di Nabulizzazione                       | 0.35 ml/min                                       |
| MMAD (Diametro Aerodinamico Medio di Particella) | 4.5 $\mu$ m (come da EN13544-1)                   |
| Volume Residuo                                   | < 0.1ml                                           |
| Funzionamento                                    | Continuo                                          |
| Spegnimento Automatico                           | dopo 25 minuti di funzionamento continuo          |
| Peso                                             | 104 gr (senza batterie)                           |
| Dimensioni                                       | cm 5 x 4 x 11,5                                   |
| Anni di Garanzia                                 | 2                                                 |
| Cartone di Spedizione                            | 6                                                 |

## CODICE

RE 300950 ————— KIWI - AEROSOL MESH



8 054619 101094

## Lite

REF RE 300850

LITE è un sistema miniaturizzato a microcompressore a pistone per aerosolterapia con nebulizzatore ad alta efficienza. Dimensioni e rumorosità estremamente ridotte, pressochè totale assenza di vibrazioni ("VRS" Vibration Reduction System) per un dispositivo facilmente trasportabile, non ingombrante e di semplice utilizzo.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nebulizzatore HI-FLO
- Maschera adulti con elastico
- Maschera pediatrica con elastico
- Boccheruola
- Forcella Nasale (non invasiva)
- Tubo aria
- Filtro aria
- Borsa di trasporto
- Adattatore Universale

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                                              |          |         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Compressore                          | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |          |         |
| Alimentazione Standard               | 100-240V – 50/60Hz                                           |          |         |
| Potenza Assorbita                    | 38,5 VA                                                      |          |         |
| Pressione Massima                    | 2 bar                                                        | 29 psi   | 200 kPa |
| Pressione Operativa                  | 0,8 bar                                                      | 11,6 psi | 80 kPa  |
| Flusso Libero                        | 12 l/min                                                     |          |         |
| Flusso Operativo                     | 4 l/min                                                      |          |         |
| Neb-rate con 4 ml di soluzione       | 0,35 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)                     |          |         |
| Diametro Aerodinamico Medio di Massa | 3 µm (MMAD) misurato come da EN 13544-1                      |          |         |
| Frazione Respirabile (< 5µm)         | > 75%                                                        |          |         |
| Funzionamento                        | Ton: 30min   Toff: 30min                                     |          |         |
| Rumorosità (normativa EN 13544-1)    | 50 dBA circa                                                 |          |         |
| Peso                                 | 0,46 kg                                                      |          |         |
| Dimensioni (Apparecchio)             | cm 14 x 3 x 9                                                |          |         |
| Anni di Garanzia                     | 5                                                            |          |         |
| Cartone di Spedizione                | 6                                                            |          |         |
| Luogo di Fabbricazione               | Italia                                                       |          |         |

CE 0123



## Mobile

REF RE 300700

MOBILE è un sistema miniaturizzato a microcompressore a pistone per aerosolterapia con nuovi sistemi integrati "VRS" (Vibration Reduction System) per la riduzione delle vibrazioni e "RCC" (Rapid Charge Control) per il controllo elettronico della carica veloce delle batterie.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nebulizzatore HI-FLO
- Maschera adulti con elastico
- Maschera pediatrica con elastico
- Boccheruola
- Forcella Nasale (non invasiva)
- Tubo aria + Filtro aria
- Borsa di trasporto
- Trasformatore universale
- Cavo Auto (per presa accendisigari)
- Caricabatterie (integrato)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                                              |          |         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Compressore                          | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |          |         |
| Alimentazione con Trasformatore      | 100-240V – 50/60Hz                                           |          |         |
| Alimentazione con Cavo per Auto      | 12V                                                          |          |         |
| Alimentazione con Pile Ricaricabili  | 8 x Pile Alcaline - AA 1.2V (non incluse)                    |          |         |
| Autonomia Pile                       | 40 to 90 min. con batterie da 1600 a 2500 mAh                |          |         |
| Tempo di ricarica                    | da 3,5 a 7 ore a seconda della capacità delle pile           |          |         |
| Potenza Assorbita (trasformatore)    | 38,5 VA                                                      |          |         |
| Pressione Massima                    | 2 bar                                                        | 29 psi   | 200 kPa |
| Pressione Operativa                  | 0,8 bar                                                      | 11,6 psi | 80 kPa  |
| Flusso Libero                        | 12 l/min                                                     |          |         |
| Flusso Operativo                     | 4 l/min                                                      |          |         |
| Neb-rate con 4 ml di soluzione       | 0,35 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)                     |          |         |
| Diametro Aerodinamico Medio di Massa | 3 µm (MMAD) misurato come da EN 13544-1                      |          |         |
| Frazione Respirabile (< 5µm)         | > 75%                                                        |          |         |
| Funzionamento                        | Ton: 30min   Toff: 30min                                     |          |         |
| Rumorosità (normativa EN 13544-1)    | 50 dBA circa                                                 |          |         |
| Peso                                 | 0,56 kg (senza batterie)                                     |          |         |
| Dimensioni (Apparecchio)             | cm 14 x 7 x 9                                                |          |         |
| Anni di Garanzia                     | 5                                                            |          |         |
| Cartone di Spedizione                | 6                                                            |          |         |
| Luogo di Fabbricazione               | Italia                                                       |          |         |

5 ANNI  
di GARANZIA

CE 0123







CE 0123

La doccia nasale NASO-FREE nasce per essere utilizzata con i più comuni apparecchi di aerosol terapia. Di forma ergonomica con pratica impugnatura, è composta da materiali anallergici e biocompatibili. Utilizzabile da tutta la famiglia grazie ai due adattatori nasali in dotazione, per adulti e bambini. Progettata per effettuare il lavaggio ed il trattamento delle cavità nasali sia con soluzioni saline che con farmaci ad uso aerosolico, favorendo la fluidificazione delle secrezioni nasali. E' adatta alle alte vie aeree in quanto produce particelle di grandezza idonea al loro trattamento.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Adattatore per Adulti
- Adattatore per uso Pediatrico
- Tubo Aria di connessione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Capacità Massima (singola somministrazione) | 10 ml                      |
| Pressione Operativa Minima                  | 20 kPa (0.20 bar)          |
| Pressione Operativa Massima suggerita       | 60 kPa (0.60 bar)          |
| Dimensione Particelle                       | da 40 $\mu$ m a 70 $\mu$ m |
| Dimensioni                                  | cm 14 x 6 x 4,8            |
| Peso                                        | 50 gr (circa)              |
| Cartone di Spedizione                       | 4                          |
| Anni di Garanzia                            | 2                          |
| Luogo di Fabbricazione                      | Italia                     |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CODICE

DN 100100 — NASO-FREE



8 054619 101162



RE 300300  
RE 300300/09

HI-FLO SET - Conf. di Nylon (Nebulizzatore HI-FLO, Maschera adulti e pediatrica, Boccheruola, Forcella Nasale, Tubo aria)  
HI-FLO SET - Conf. in Scatola (Nebulizzatore HI-FLO, Maschera adulti e pediatrica, Boccheruola, Forcella Nasale, Tubo aria)



CE 0123

## INCENTIVATORI DI RESPIRAZIONE



La nuova linea CA-MI di incentivatori di respirazione comprende tre dispositivi efficaci nella stimolazione dell'inspirazione profonda e nella stima dei miglioramenti del paziente per quanto riguarda il flusso e il volume d'aria inspirato.

### PulmoVOL 50 | PulmoVOL 25

PULMOVOL è una linea di incentivatori volumetrici di respirazione utilizzati per favorire l'inspirazione forzata massimale nei pazienti con patologie o difficoltà respiratorie. Sono indicati nella prevenzione di complicanze respiratorie postoperatorie e in pazienti soggetti a terapia IMT -Inspiratory Muscle Training- (allenamento muscolare inspiratorio). I dispositivi hanno una chiara scala graduata (modello VOL50 da 300 a 5000 cc | modello VOL25 da 200 a 2500 cc) e sono provvisti di indicatori visivi che il fisioterapista utilizza per fissare l'obiettivo da raggiungere, e il paziente per segnare il risultato raggiunto.

RE 400210 PULMOVOL 50 - In sacchetto singolo nylon trasparente. Cartone Master da 10  
RE 400211 PULMOVOL 25 - In sacchetto singolo nylon trasparente. Cartone Master da 10

### PulmoGain

Inspirando profondamente, il paziente deve cercare di alzare due o tre sfere, trattenendo l'inspirazione il più a lungo possibile e staccando la boccheruola dalle labbra per espirare, sempre seguendo le istruzioni del medico curante. Il dispositivo può essere completamente smontato per le operazioni di pulizia e disinfezione, mentre il tubo corrugato, la boccheruola e il filtro aria sono sostituibili.

RE 400100 PULMOGAIN - In scatola singola display multilingue. Cartone Master da 24  
RE 400110 PULMOGAIN - In sacchetto singolo nylon trasparente. Cartone Master da 24

### PulmoLift

Dispositivo per esercitare e stimolare la respirazione attraverso l'espirazione. Può essere utilizzato come dispositivo a sé stante o collegato a qualsiasi altro incentivatore CA-MI, come il Pulmogain o il Pulmovol, per esercitare la respirazione attraverso l'inspirazione e l'espirazione senza dover rimuovere la boccheruola dalle labbra.

RE 400250 PULMOLIFT - In sacchetto singolo nylon trasparente. Cartone Master da 50  
RE 400250/01 PULMOLIFT con tubo e boccheruola - In sacchetto singolo nylon trasparente. Cartone Master da 50

L'unico Inalatore dotato di:

- Maniglia di trasporto e tappo di sicurezza antisvitamento
- Ampolla con flusso orientabile
- Camera miscelazione (Venturi) in acciaio inox
- Contenitore per liquidi e dosatore con incastro antiribaltamento
- Portabottiglia a scomparsa



CE 0123

NEW VAPINAL è un inalatore per acque termali con caldaia in acciaio inossidabile funzionante con una resistenza ad alimentazione elettrica 230V.

Per mezzo di ampolla a "principio Venturi", sviluppa ed eroga vapore caldo-umido miscelandolo con i principi di acqua termale contenuti nella bottiglia all'esterno dell'apparecchio.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Ampolla ————— SP 0069
- Ugello Ampolla ————— RE 220002
- Tubo Pescante ————— RE 220003
- Tappo Valvola di Sicurezza ————— SP 0067
- Caraffa raccolta liquidi ————— RE 420004

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Alimentazione               | 230V-50Hz                    |
| Capacità Caldaia            | 800 ml                       |
| Tempo inizio Vaporizzazione | 5 ÷ 8 min                    |
| Potenza Assorbita           | 600 W                        |
| Tempo di Inalazione         | 12 ÷ 15 min                  |
|                             | per 1000 ml di acqua termale |
| Fusibile                    | 1 x 4A L 250V                |
| Funzionamento               | Continuo                     |
| Grado di Protezione         | IP 21 (EN 60601-1-11)        |
| Peso (senza acqua)          | Kg 1.50                      |
| Dimensioni (Apparecchio)    | cm 25 x 28 x 24              |
| Anni di Garanzia            | 2                            |
| Cartone di Spedizione       | 3                            |
| Luogo di Fabbricazione      | Italia                       |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CODICE

RE 420000 ————— NEW VAPINAL (Bottiglia di Acqua Termale non inclusa)



8 033622 546276

## Humi-Rainbow

HUMI-RAINBOW è un umidificatore ad ultrasuoni, estremamente silenzioso ed a risparmio energetico, dotato di manopola per la regolazione dell'emissione di vapore acqueo freddo nell'ambiente, direzionabile a 360°. Le dimensioni contenute e lo stile del design lo rendono particolarmente adatto ad ogni ambiente ed arredamento. Un vano accoglie le essenze, preferibilmente OLY-SAN/ZANZ/SENS da noi testate e consigliate, per un effetto purificante e/o aromatico. Ispirandosi alla cromoterapia può cambiare il colore a piacimento.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacità Serbatoio          | 28 ml                                                |
| Velocità Erogazione Umidità | 280 ml/h                                             |
| Metatratura Ambienti        | minima 10 m <sup>2</sup>   massima 25 m <sup>2</sup> |
| Tempo Max di Funzionamento  | 10 ore (in continuo)                                 |
| Lunghezza Cavo              | 1.5 m                                                |
| Dimensione (confezione)     | cm 30 (h) x 19 (diametro)                            |
| Anni di Garanzia            | 2                                                    |
| Cartone di Spedizione       | 6                                                    |
| Codice                      | UM 100500                                            |



## Essentia

ESSENTIA è un umidificatore per essenze ed al tempo stesso un oggetto d'arredo, grazie al suo design elegante ed ai materiali naturali come il vetro ed il legno che lo rendono particolarmente attuale. Le essenze OLYSAN, OLYZANZ e OLYSENS possono essere diffuse nell'ambiente per avere differenti sensazioni di benessere. L'atmosfera può essere arricchita dalla gamma di 7 colori che possono cambiare automaticamente o sceglierne uno fisso, per un piacevole effetto cromoterapico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Capacità Serbatoio          | 85 ml                     |
| Velocità Erogazione Umidità | 16 ml/h                   |
| Metatratura Ambienti        | massima 25 m <sup>2</sup> |
| Tempo Max di Funzionamento  | 6-8 ore (in continuo)     |
| Peso                        | 0,64 Kg                   |
| Dimensioni                  | cm 8,5 x 8,5 x 15,1       |
| Anni di Garanzia            | 2                         |
| Cartone di Spedizione       | 6                         |
| Codice                      | UM 100600                 |



## OlySan, OlyZanz, OlySens

Utilizzabili con HUMI-RAINBOW ed ESSENTIA diffondono nell'ambiente note profumate, che nel contempo donano all'ambiente particolari effetti, in 4 varianti.

### CODICE FRAGRANZA COMPOSIZIONE

|       |              |                                                                                                                                    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00304 | OLYSAN 15ml  | PINO SILVESTRE & TEA TREE ha note legnose e balsamiche per un'azione antisettica ed antibatterica.                                 |
| 00305 | OLYSAN 15ml  | AGRUMETO ha una fragranza agrumata particolarmente fresca che rimanda alle sensazioni dei profumi mediterranei.                    |
| 00306 | OLYZANZ 15ml | OLYZANZ con lavanda, geranio e citronella, una miscela di piante dalle straordinarie capacità repellenti per le zanzare.           |
| 00307 | OLYSENS 15ml | OLYSENS arricchisce l'esperienza di coppia, questa fragranza è apprezzata da uomini e donne, per un effetto stimolante e sensuale. |

**OLYSAN**  
ESSENZE NATURALI  
PER AMBIENTE



**agrumeto**

**CA-MI**

100% MADE IN ITALY



HUMIRAINBOW



ESSENTIA



PINO & TEA TREE



AGRUMETO



OLYZANZ



OLYSENS



# NISSEI

×

## Kazuo Kawasaki

distribuito in esclusiva  
per l'Italia da CA-MI

Linea\* di misuratori di pressione, completamente automatici, in grado di fornire una lettura rapida e precisa. Tecnologia Giapponese by NISSEI.



pulsante  
**START-STOP** con  
sistema TOUCH



indicatore di  
**CONDIZIONE OTTIMALE**  
di misurazione  
(modello DSK1031)



indicatore **CORRETTO**  
**POSIZIONAMENTO**  
del bracciale  
(modello DSK1031)



gonfiaggio calibrato con  
tecnologia **FUZZY**  
(WSK1011e DSK1031)



misurazione diretta  
durante l'**INFLAZIONE**  
(modello DSK1011)



parametri **PERSONALI**  
di misurazione ottimale  
(modello DSK1011)



indicatore di  
**ARITMIA CARDIACA**  
rilevata



grafica **VALORI**  
**PRESSIONE** secondo  
classificazione OMS



**ALLARME DI**  
**MOVIMENTO**  
durante la misurazione



**DUE set di**  
**MEMORIE**



funzione  
**OROLOGIO**



**DISPLAY**  
a grandi cifre per una  
facile consultazione

\*Linea progettata dal Dr. Kazuo Kawasaki, designer giapponese di rinomata fama, uno dei suoi progetti di ricerca è il design per il cuore artificiale. Professore presso l'Università di Osaka, direttore della Apple nei primi anni novanta. Il segreto del successo dei suoi prodotti non è mai stato limitato alla bellezza ma ha sempre dato priorità anche la funzionalità d'utilizzo così come è riuscito a fare anche con il progetto NISSEI.

NISSEI

x  
Kazuo Kawasakidistribuito in esclusiva  
per l'Italia da CA-MI

CE 0123

WSK-1011 dispone delle caratteristiche essenziali per rendere la misurazione cardiaca di facile e semplice utilizzo aumentandone l'affidabilità di rilevazione, utilizzando il metodo oscillometrico con logica Fuzzy di interpretazione dei dati riscontrati durante la misura.

Durante la misurazione il ritmo degli impulsi può subire variazioni a causa del movimento che il paziente, anche solo parlando, può variare; il tutto viene quindi rilevato dalla macchina e fatto presente da apposito indicatore sul display per ripeterne la misurazione.

Il dispositivo rileva anche la pressione del polso e ritmo polso irregolare con simbolo di allerta Aritmia. La misurazione pressoria viene rilevata come da indicazioni OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Nella memoria delle misurazioni, la doppia predisposizione paziente con 60 memorie di misurazione ognuna, permette di avere la personalizzazione e quindi la distinzione delle proprie misurazioni.

WSK-1011 calcola e visualizza altresì la Pressione Pulsatoria, indicata sul Display con le lettere "PP", risultante dalla differenza tra la sistolica e la diastolica, è un importante indice di riferimento per la rigidità delle arterie e quindi un indicatore di rischio circolatorio molto importante (un valore attorno ai 45 mmHg è un valore normale).

WSK-1011 è il primo modello da polso a passare la valutazione clinica ESH.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                              | cm 7 x 2,7 x 7                                                  |
| Display                                 | LCD a 15 cifre                                                  |
| Circonferenza Polso                     | da 12,5 a 22,5 cm                                               |
| Peso                                    | 110 g (solo unità principale, non comprese le batterie)         |
| Metodo misurazione                      | Oscillometrico                                                  |
| Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio         | Automatico (Fuzzy) con valvola di Sgonfiaggio rapido automatico |
| Intervallo misurazione pressione        | 50-250 mmHg (sistolica)   40-140 mmHg (diastolica)              |
| Intervallo pressione bracciale          | 3-300 mmHg                                                      |
| Intervallo misurazione battito cardiaco | 40-160 bpm (frequenza del polso)                                |
| Accuratezza misurazione pressione       | ± 3 mmHg                                                        |
| Accuratezza frequenza battito cardiaco  | ± 5% della lettura                                              |
| Memorie                                 | 2 canali da 60 misure salvabili in ciascuno di essi             |
| Anni di Garanzia                        | 3                                                               |
| Cartone di Spedizione                   | 10                                                              |





CE 0123

DSK-1011 dispone delle caratteristiche e delle funzioni essenziali per rendere semplice ed intuitiva la misurazione della pressione arteriosa. Il suo utilizzo è facile ed immediato, favorendo di conseguenza l'affidabilità di rilevazione ed l'interpretazione dei dati tramite il metodo oscillometrico. L'innovativa tecnologia inflattiva di cui è dotato il dispositivo, funziona gonfiando il bracciale al valore appena sufficiente a rilevare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, identificando così per primo il valore di pressione Diastolica, prosegue poi con un gonfiaggio graduale sino ad identificare il valore di pressione Sistolica, quindi, immediatamente dopo, termina l'inflazione e avvia lo sgonfiaggio rapido del bracciale. Con questo sistema la misurazione risulta estremamente "confortevole", tanto che la procedura viene completata prima che il paziente abbia tempo di percepire l'inflazione del bracciale come "costrittiva". Il DSK-1011 "memorizza" il miglior valore di inflazione (gonfiaggio) calcolato sulla base dei valori delle ultime misurazioni memorizzate, quindi imposta automaticamente il gonfiaggio rapido al presunto livello ottimale memorizzato, riducendo quindi sensibilmente i tempi necessari alla corretta misurazione. Molteplici e particolarmente utili ed importanti le funzioni in dotazione al dispositivo e le informazioni visualizzate a fine misurazione sull'ampio schermo LCD da 78cm<sup>2</sup>. Oltre che ai valori di pressione arteriosa e battito cardiaco, visualizzati oltre che in valore numerico anche graficamente secondo schema della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), il dispositivo segnala a schermo anche l'eventuale ritmo cardiaco irregolare (aritmia) e mostra il valore di Pressione Pulsatoria calcolata (visualizzata con "PP" sul display), cioè la differenza tra valori di pressione sistolica e diastolica, un dato importante perché indice di valutazione della rigidità delle arterie e, conseguentemente, indicatore di rilievo nella valutazione del rischio circolatorio. Il dispositivo è inoltre dotato di un doppio canale di memoria, su ognuno dei quali, in modo personalizzato, il singolo utilizzatore può salvare sino ad un massimo di 60 misurazioni che lo riguardano.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                              | cm 11,5 x 11,5 x 6,59                                             |
| Display                                 | LCD da 78cm <sup>2</sup> a 15 cifre                               |
| Diametro braccio di applicazione        | 22-32 cm                                                          |
| Peso                                    | 250 g (solo unità principale, non comprese le batterie)           |
| Metodo misurazione                      | Oscillometrico                                                    |
| Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio         | Automatico in salita (inflattivo)                                 |
| Intervallo misurazione pressione        | 50-250 mmHg (sistolica)   40-180 mmHg (diastolica)                |
| Intervallo pressione bracciale          | 3-300 mmHg                                                        |
| Intervallo misurazione battito cardiaco | 40-160 bpm (frequenza del polso)                                  |
| Accuratezza misurazione pressione       | ± 3 mmHg                                                          |
| Accuratezza frequenza battito cardiaco  | ± 5% della lettura                                                |
| Memorie                                 | 2 canali da 60 misure salvabili in ciascuno di essi               |
| Alimentazione                           | 4 batterie alcaline tipo AA - 1.5V (Alimentatore AC/DC opzionale) |
| Anni di Garanzia                        | 3                                                                 |
| Cartone di Spedizione                   | 10                                                                |





NISSEI

x  
Kazuo Kawasakidistribuito in esclusiva  
per l'Italia da CA-MI

CE 0123

DSK-1031 dispone delle caratteristiche essenziali per rendere la misurazione cardiaca di facile e semplice utilizzo aumentandone l'affidabilità di rilevazione. Il dispositivo gonfia il bracciale al valore appena sufficiente a rilevare per rilevare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca utilizzando il metodo oscillometrico.

Il gonfiaggio con metodo oscillometrico (con logica Fuzzy di interpretazione dei dati riscontrati durante la misura) permette di evitare la costrizioni del braccio ed il conseguente fastidio nei pazienti.

Per migliorare l'attendibilità della misurazione, spesso influenzata dal modo in cui si indossa il bracciale, DSK-1031 rileverà se il bracciale è stato indossato correttamente o meno con apposito simbolo di allerta. Durante la misurazione, il ritmo degli impulsi può essere disturbato dal movimento, anche solo parlando, o anche a causa di aritmie. Tali inconvenienti vengono rilevati dal dispositivo affinché la misurazione sia ripetuta.

Inoltre, DSK-1031 rileva la Pressione Pulsatoria (visualizzata con "PP" sul display), cioè la differenza tra quella sistolica e quella diastolica, un importante indice di riferimento della rigidità delle arterie e, quindi, un indicatore di rischio circolatorio.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                              | cm 11,5 x 11,5 x 6,59                                             |
| Display                                 | LCD a 15 cifre                                                    |
| Diametro braccio di applicazione        | 22-42 cm                                                          |
| Peso                                    | 250 g (solo unità principale, non comprese le batterie)           |
| Metodo misurazione                      | Oscillometrico                                                    |
| Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio         | Automatico (Fuzzy) con valvola di Sgonfiaggio rapido automatico   |
| Intervallo misurazione pressione        | 50-250 mmHg (sistolica)   40-140 mmHg (diastolica)                |
| Intervallo pressione bracciale          | 3-300 mmHg                                                        |
| Intervallo misurazione battito cardiaco | 40-160 bpm (frequenza del polso)                                  |
| Accuratezza misurazione pressione       | ± 3 mmHg                                                          |
| Accuratezza frequenza battito cardiaco  | ± 5% della lettura                                                |
| Memorie                                 | 2 canali da 60 misure salvabili in ciascuno di essi               |
| Alimentazione                           | 4 batterie alcaline tipo AA - 1.5V (Alimentatore AC/DC opzionale) |
| Anni di Garanzia                        | 3                                                                 |
| Cartone di Spedizione                   | 10                                                                |





NISSEI

distribuito in esclusiva  
per l'Italia da CA-MI

CE 0123

DS-11, l'ultimo nato, semplice e compatto, di casa NISSEI. Sviluppato per divenire punto di riferimento della categoria "BASIC", la fascia di prodotti con maggior consumo grazie a un minor numero di funzioni ed accessori che ne rendono più contenuti i costi. Ma anche in questa specifica fascia di mercato NISSEI ha voluto fare la differenza realizzando un dispositivo, DS-11 appunto, che spicca comunque non solo per la Qualità derivante dal Progetto e dalla Tecnologia Giapponese, ma anche dalle funzioni e dagli accessori in dotazione, caratteristici dei prodotti TOP di mercato, ed eccezionalmente impiegati anche su questo dispositivo. Grazie all'uso della più innovativa e confortevole tecnologia di misurazione inflattiva, delle funzioni di rilevamento movimento durante la misurazione, riscontro aritmia, media delle ultime tre misurazioni, ma anche di importanti accessori come il bracciale maggiorato per l'impiego su diametri dai 22 ai 42cm, DS-11 è un dispositivo di fascia BASIC solo per posizionamento commerciale, ma di fatto, con dotazioni funzionali e accessorie tipiche delle fasce prodotto più elevate. Completamente automatico nella misurazione e nella registrazione dei risultati, presenta una interfaccia utente estremamente intuitiva ed essenziale, così da poter misurare autonomamente la pressione sanguigna in modo semplice e confortevole, con conseguente miglioramento dell'affidabilità del dato, rilevato dal dispositivo tramite il metodo oscillometrico. La tecnologia inflattiva del dispositivo, funziona gonfiando il bracciale al valore appena sufficiente a rilevare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, identificando così per primo il valore di pressione Diastolica, prosegue poi con un gonfiaggio graduale sino ad identificare il valore di pressione Sistolica, immediatamente dopo termina l'inflazione e avvia rapidamente lo sgonfiaggio del bracciale. Con questo sistema la misurazione risulta estremamente "confortevole", tanto che la procedura viene completata prima che il paziente abbia tempo di percepire l'inflazione del bracciale come "costrittiva". Il bracciale maggiorato rende il prodotto immediatamente utilizzabile su un ampio intervallo dimensionale del braccio di misura, evitando quindi l'acquisto di un ulteriore accessorio da parte di un buon numero di pazienti con una dimensione "importante" del braccio. Come già detto, la registrazione in memoria, dei dati riscontrati dal dispositivo è automatica (sino a max 60 misurazioni) così come il calcolo del valore medio delle ultime 3 misure in memoria. Anche DS-11 così come tutti i dispositivi NISSEI distribuiti da CA-MI vanta la Validazione Clinica di Accuratezza ESH conformemente al più recente protocollo internazionale 2010.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                              | cm 11,65 x 12,22 x 6,99                                           |
| Display                                 | LCD                                                               |
| Diametro braccio di applicazione        | 22-42 cm                                                          |
| Peso                                    | 250 g (solo unità principale, non comprese le batterie)           |
| Metodo misurazione                      | Oscillometrico                                                    |
| Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio         | Automatico in salita (inflattivo)                                 |
| Intervallo misurazione pressione        | 50-250 mmHg (sistolica)   40-180 mmHg (diastolica)                |
| Intervallo pressione bracciale          | 3-300 mmHg                                                        |
| Intervallo misurazione battito cardiaco | 40-180 bpm (frequenza del polso)                                  |
| Accuratezza misurazione pressione       | ± 3 mmHg                                                          |
| Accuratezza frequenza battito cardiaco  | ± 5% della lettura                                                |
| Memorie                                 | 60 misure registrate su singolo canale in automatico              |
| Alimentazione                           | 4 batterie alcaline tipo AA - 1.5V (Alimentatore AC/DC opzionale) |
| Anni di Garanzia                        | 3                                                                 |
| Cartone di Spedizione                   | 10                                                                |



NISSEI

distribuito in esclusiva  
per l'Italia da CA-MI

CE 0123

DM-3000, il dispositivo della più alta gamma professionale NISSEI, prodotto interamente in Giappone. Pensato e realizzato per l'uso da parte di personale medico e para-medico specialista in ambito Ospedaliero, Clinico-Ambulatoriale e Farmaceutico, questo dispositivo è dotato di caratteristiche funzionali e di accuratezza estremamente elevate, nel contempo talmente intuitive da poter essere utilizzato anche in ambito HOME-CARE da persone comuni ma con particolari necessità di controllo della pressione arteriosa. Caratteristiche costruttive particolari e uniche sono rappresentate dai due schermi a cristallo liquido con chiara e ampia lettura dei dati pressori visualizzati sia in forma di colonna pressoria (tipica dei dispositivi a colonna di mercurio) sia in forma digitale numerica; dalla possibilità di doppia alimentazione tramite alimentatore universale AC/DC oppure tramite batteria interna ricaricabile NiMH (Nichel-Metallo Idruo) estraibile e sostituibile in pochi semplici gesti (in dotazione) così da rendere trasportabile il dispositivo; dall'ampio vano posteriore contenente due bracciali del tipo Medio e Large (in dotazione) e dal . Ma il dispositivo è unico anche per le funzioni di cui è dotato, ovvero la regolazione manuale della costrizione massima del bracciale (conoscendo i valori soliti del paziente si può così ridurre sia il valore di costrizione al braccio sia la durata della misurazione) e la possibilità di impostare con un semplice interruttore, la misura automatica con metodo oscillometrico (AUTO) o quella manuale con metodo auscultatorio tipico del professionista medico (MANUAL) e che permette la regolazione dello velocità di sgonfiaggio del bracciale da parte dell'operatore che effettua la misura.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                              | cm 13,5 x 20,6 x 27,6                                               |
| Display                                 | Doppio LCD, uno a colonna da 300 cifre segmento e uno a 10 cifre    |
| Diametro braccio di applicazione        | da 22 a 32cm Medium   da 32 a 42cm Large                            |
| Peso                                    | 1260 g (solo unità principale, senza alimentatore e batteria)       |
| Metodo misurazione                      | Oscillometrico (misura automatica) - Auscultatorio (misura manuale) |
| Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio         | Automatico con valvola di sgonfiaggio e scarico elettrica           |
| Intervallo misurazione pressione        | 50-250 mmHg (sistolica)   40-180 mmHg (diastolica)                  |
| Intervallo pressione bracciale          | 0-300 mmHg                                                          |
| Intervallo misurazione battito cardiaco | 40-160 bpm (frequenza del polso)                                    |
| Accuratezza misurazione pressione       | ± 3 mmHg                                                            |
| Accuratezza frequenza battito cardiaco  | ± 5% della lettura                                                  |
| Memorie                                 | Registrazione sino a max 7 misurazioni in sistema AUTO              |
| Alimentazione                           | Adattatore AC 7Vdc o Batteria NiMH 4.8Vdc ricaricabile              |
| Anni di Garanzia                        | 3                                                                   |
| Cartone di Spedizione                   | 1                                                                   |



# BO-750BT

REF. BO-750BT


Prodotto da NISSEI il pulsossimetro BO-750BT monitorizza, identifica e visualizza i parametri clinici di saturazione d'ossigeno (SpO<sub>2</sub>) ed il numero di battiti cardiaci rilevati in valore numerico puro. Semplicissimo da utilizzare grazie alla tecnologia "Full-Auto" che permette al dispositivo di accendersi, spegnersi e ruotare di 180° la visualizzazione dei dati rilevati (in funzione dell'inclinazione dello strumento stesso verso il paziente o verso un operatore) in modo completamente automatico. La funzione Bluetooth (con tecnologia Low Energy 4.1) con cui è equipaggiato il dispositivo, permette il trasferimento dei dati sul proprio smartphone o tablet dopo che su questi viene scaricato ed installata la specifica applicazione "HealStyle" sviluppata dal fabbricante NISSEI e scaricabile dal sito specifico. Le elevate caratteristiche strutturali e qualitative rendono il dispositivo particolarmente indicato anche per l'uso professionale ambulatoriale/ospedaliero. I test di accuratezza clinica effettuati secondo la norma ISO 80601-2-61:2011 sono stati condotti presso centri specializzati in Giappone e assicurano una affidabilità del dato particolarmente elevata.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio di misurazione        | Assorbimento luce a doppia lunghezza d'onda                                                  |
| SpO <sub>2</sub>                | Intervallo misurazione: 0% - 100%<br>Precisione misurazione: 70% - 100%: $\pm 2\%$           |
| Battito Cardiaco                | Intervallo misurazione: 30 - 240 bpm<br>Precisione misurazione: $\pm 3\%$ o 1 unità di cifra |
| Dimensioni dito di applicazione | 30 / 60 mm                                                                                   |
| Alimentazione a Pile            | 1 Batteria Alcalina LR03 - AAA, 1.5V<br>(durata circa 50 ore in uso continuo)                |
| Potenza assorbita               | circa 0.09W                                                                                  |
| Grado di Protezione all'acqua   | IPX2 (IEC 60529)                                                                             |
| Dimensioni                      | cm 6 x 3,5 x 3,2                                                                             |
| Peso                            | 37gr (senza batteria)                                                                        |
| Anni di Garanzia                | 2                                                                                            |
| Cartone di Spedizione           | 40                                                                                           |



CE 0123

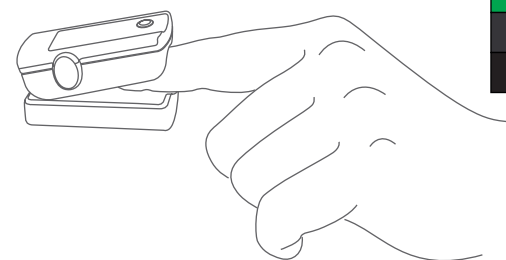

# O2 Easy

REF. OX 100000

O2-EASY è un pulsossimetro da dito per misurare e monitorare la saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO<sub>2</sub>) e il battito cardiaco. Il design di dimensioni ridotte, compatto e la tecnologia di precisione e grande durata facilitano l'automisurazione domiciliare. Trova ampio utilizzo in vari settori come l'home-care, cliniche, ospedali, ambulatori, pronto soccorso e odontoiatria.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di Utilizzo      | Adulto e Pediatrico                                                                                                                               |
| SpO <sub>2</sub>      | Intervallo misurazione: 70% - 99%<br>Risoluzione: 1%<br>Precisione misurazione: 80% - 99%: $\pm 2\%$<br>70% - 79%: $\pm 3\%$<br>69%: non definito |
| Battito Cardiaco      | Intervallo misurazione: 30 - 235 bpm<br>Risoluzione: 1 bpm<br>Precisione misurazione: $\pm 2$ bpm o $\pm 2\%$                                     |
| Dimensioni            | cm 5,8 x 3,2 x 3,4                                                                                                                                |
| Peso                  | 50g (2 batterie AAA incluse)                                                                                                                      |
| Alimentazione a Pile  | 2 x Batterie Alcaline - AAA, 1.5V                                                                                                                 |
| Anni di Garanzia      | 2                                                                                                                                                 |
| Cartone di Spedizione | 40                                                                                                                                                |



CE 0123





# My-Pressure 1.0

REF.

RE 501000

CLINICALLY VALIDATED  
E.S.H. Protocol  
VALIDATO CLINICAMENTE

MY-PRESSURE 1.0 è un misuratore di pressione digitale, completamente automatico, in grado di fornire una lettura rapida e precisa. Validato clinicamente conformemente al protocollo internazionale della Società Europea Ipertensione (ESH).

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 Bracciale circonferenza 22-32 cm
- 1 Borsina da trasporto
- 4 Pile alcaline tipo AA - 1.5V

## OPTIONAL

- Trasformatore di rete SP 0210
- Bracciale XL (32-45 cm) SP 0197/01

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni                              | cm 15 x 13 x 10,5    |
| Peso                                    | 300 g                |
| Metodo misurazione                      | Oscillometrico       |
| Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio         | Automatico           |
| Intervallo misurazione pressione        | 40-260mmHg           |
| Intervallo pressione bracciale          | 0-300 mmHg           |
| Intervallo misurazione battito cardiaco | 40-160 volte/min     |
| Precisione misurazione pressione        | +/- 5% della lettura |
| Precisione misurazione battito cardiaco | +/- 3 mmHg           |
| Alimentazione                           | 4 batterie alcaline  |
| Anni di Garanzia                        | 2                    |
| Cartone di Spedizione                   | 10                   |



8 033622 546320

CE 0123



# Eco-Pressure

REF.

RE 520110

ECO-PRESSURE è un misuratore di pressione da polso, completamente automatico, in grado di fornire una lettura rapida e precisa.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 Bracciale da polso (circonferenza 12,5-20,5 cm)
- 1 Contenitore in plastica antiurto
- 2 Pile da 1.5V AAA (sostituibili)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensioni                              | cm 6,7 x 7,3 x 7                    |
| Peso                                    | 240 g                               |
| Metodo misurazione                      | Oscillometrico                      |
| Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio         | Automatico                          |
| Intervallo misurazione pressione        | 40-260mmHg                          |
| Intervallo pressione bracciale          | 0-300mmHg                           |
| Intervallo misurazione battito cardiaco | 40-160 volte/min                    |
| Precisione misurazione pressione        | +/- 3mmHg                           |
| Precisione misurazione battito cardiaco | +/- 5% della lettura                |
| Alimentazione                           | 2 batterie alcaline tipo AAA - 1.5V |
| Anni di Garanzia                        | 2                                   |
| Cartone di Spedizione                   | 40                                  |



8 033622 546184

CE 0123







CE 0123

CLINICALLY VALIDATED  
E.S.H. Protocol  
VALIDATO CLINICAMENTE

MY-PRESSURE 2.0 è un dispositivo elettronico digitale per la misurazione della pressione sanguigna e del battito cardiaco. Il prodotto permette una lettura rapida ed accurata di pressione Sistolica e Diastolica, delle pulsazioni e rileva eventuali macro-aritmie cardiache. La procedura completamente automatica di misura rende lo strumento particolarmente facile da utilizzare, mentre il grande schermo di cui è dotato, permette una perfetta visibilità dei dati. Software di misura validato clinicamente e in conformità al protocollo di prova internazionale della Società Europea di Ipertensione (ESH).

## FUNZIONI OPERATIVE

- Tecnologia Fuzzy Logic
- Indicatore battito irregolare
- Indicatore con scala colori conforme alla dell'OMS (1999 WHO-IHS)
- Predisposizione uso con alimentatore di rete
- 2x90 Memorie con sistema salva dati
- Media delle ultime tre misurazioni
- Funzione Data/Ora
- Stand By automatico

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 Bracciale circonferenza 22-32 cm
- 1 Borsina da trasporto
- 4 Pile alcaline tipo AA - 1.5V

## OPTIONAL

- Trasformatore di rete SP 0210
- Bracciale XL (32-45 cm) SP 0197/01

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                                 | cm 10,5 x 12 x 5,5                                                |
| Peso                                       | 310 g                                                             |
| Metodo misurazione                         | Oscillometrico                                                    |
| Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio            | Automatico                                                        |
| Intervallo misurazione pressione           | 40-260 mmHg                                                       |
| Intervallo pressione bracciale             | 0-300 mmHg                                                        |
| Intervallo misurazione battito cardiaco    | 40-160 battiti/min                                                |
| Accuratezza della misura Battito Cardiaco  | +/- 5% della lettura                                              |
| Accuratezza della misura Pressione Statica | +/- 3 mmHg                                                        |
| Alimentazione                              | 4 batterie alcaline tipo AA - 1.5V (Alimentatore AC/DC opzionale) |
| Anni di Garanzia                           | 2                                                                 |
| Cartone di Spedizione                      | 10                                                                |

## CODICE

RE 503000 MY-PRESSURE 2.0



8 054619 100349

## P-50

REF PR 310050



CE 0123

Corpo in plastica  
Gonfiaggio manuale  
Borsina di trasporto  
Dimensioni: Ø 67 x 160 mm  
Peso: 210 g  
Unità di spedizione: 30 pz



## P-100

REF PR 310100



CE 0123

Corpo in metallo  
Pulsante di sgonfiaggio rapido  
Borsina di trasporto  
Dimensioni: Ø 67 x 160 mm  
Peso: 250 g  
Unità di spedizione: 30 pz



## A-50

REF PR 315050



CE 0123

Gonfiaggio manuale  
Borsina di trasporto  
Dimensioni: Ø 50 x 90 mm  
Peso: 110 g  
Unità di spedizione: 50 pz



## A-100

REF PR 315100



CE 0123

Gonfiaggio manuale  
Borsina di trasporto  
Stetoscopio compreso  
Morsetto metallico per  
agganciare il manometro al  
bracciale  
Dimensioni: Ø 50 x 90 mm  
Peso: 110 g  
Unità di spedizione: 50 pz



## P-130

REF PR 310000/02



CE 0123

- 1 x Sfigmomanometro Palmare (0-300 mmHg)
  - 1 x Stetoscopio a Testa Singola
  - 3 x Bracciali (pediatrico, adulto, obeso)
  - 1 x Borsina di Trasporto
- Unità di Spedizione: 20 set



## S-10

REF ST 100000



CE

- Padiglione Singolo 47 mm
  - Olive Morbide
  - Anelli Antifreddo
  - Testa in Alluminio
  - Tubo Singolo ad Y in PVC
  - Confezione Singola
  - 2 Anni di Garanzia
- Unità di Spedizione: 100 pz



## S-20

REF ST 100001



CE

- Doppio Padiglione 48 mm
  - Padiglione Grande per l'auscultazione di Cuore e Polmoni
  - Padiglione Piccolo per Suoni a Bassa Frequenza
  - Testa in Alluminio anodizzato
  - Anelli Antifreddo
  - Olive Morbide
  - Tubo Singolo ad Y in PVC
  - Confezione Singola
  - 2 Anni di Garanzia
- Unità di Spedizione: 100 pz



## S-30

REF ST 100002



CE

- Doppio Padiglione
  - Membrana da 45,4 mm per auscultazione nell'Adulto
  - Membrana Piccola per auscultazione nel Bambino
  - Campane membrane per auscultazione dal Neonato all'Adulto
  - Olive Morbide
  - Doppio Tubo in PVC
  - Anelli Antifreddo
  - 2 Anni di Garanzia
- Unità di Spedizione: 50 pz



### CONSUMABILI

|                                                  | P-50     | P-100 | A-50     | A-100    | S-10       | S-20       | S-30  |
|--------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|------------|------------|-------|
| BRACCIALE ADULTI, 25-40 cm, colore Nero          | 11158    |       |          |          |            |            |       |
| BRACCIALE ADULTI, 25-40 cm, colore Grigio        |          | 11161 | 11163    | 11163    |            |            |       |
| BRACCIALE PEDIATRICO, 18-26 cm, colore Nero      | 11160    | 11160 | 11165    | 11165    |            |            |       |
| BRACCIALE OBESI, 33-51 cm, colore Nero           | 11159    | 11159 | 11164    | 11164    |            |            |       |
| POMPA GONFIAGGIO, colore Nero (senza regolatore) |          |       | 11156    | 11156    |            |            |       |
| REGOLATORE per pompa di gonfiaggio               |          |       | 11156/01 | 11156/01 |            |            |       |
| POMPA GONFIAGGIO, colore Grigio                  |          | 11162 |          |          |            |            |       |
| POMPA GONFIAGGIO, colore Nero                    | 11162/01 |       |          |          |            |            |       |
| OLIVE MORBIDE (Set da 4 pz.)                     |          |       |          |          |            |            | 11166 |
| TUBI DI RICAMBIO COLORATI                        |          |       |          |          |            |            |       |
| Giallo                                           |          |       |          |          | SP0245/GIA | SP0245/GIA |       |
| Rosso                                            |          |       |          |          | SP0245/ROS | SP0245/ROS |       |
| Porpora                                          |          |       |          |          | SP0245/POR | SP0245/POR |       |
| Verde                                            |          |       |          |          | SP0245/VER | SP0245/VER |       |
| Azzurro                                          |          |       |          |          | SP0245/AZZ | SP0245/AZZ |       |
| Viola                                            |          |       |          |          | SP0245/VIO | SP0245/VIO |       |



Giallo  
Rosso  
Porpora  
Verde  
Azzurro  
Viola

## T-Flash

REF.

TR 100150



ST-FLASH è il termometro ad infrarossi rapido e silenzioso. Adatto su pazienti di qualsiasi età, permette in un solo secondo e senza alcun contatto, nella massima igiene anche in famiglia, la rilevazione della temperatura corporea. Il dispositivo registra automaticamente il valore di ogni misurazione in una memoria che ne contiene sino a 25 e al termine di ogni misura sullo schermo visualizza non solo il dato appena registrato, e quello della misurazione precedente, così da permettere un immediato confronto. Rileva con precisione la temperatura ambiente e di superfici, di liquidi e del corpo.

ACCESSORI IN DOTAZIONE - Batteria al Litio del tipo CR2032  
- Coprisonda in plastica antiurto

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                  | cm 8.1 x 4.6 x 4                                                                                  |
| Peso                        | Peso 60g (con batteria inclusa)                                                                   |
| Metodo misurazione          | Infrarossi a distanza   NO-TOUCH da 1 a 3cm                                                       |
| Campo di Misurazione        | 34 ÷ 42.2 °C in modalità Fronte (misura corporea)<br>-22°C ÷ 80 °C in modalità Scan (superfici)   |
| Accuratezza misura corporea | ±0.2° C (0.4° F) nell'intervallo 35 ÷ 42° C<br>±0.3° C (0.5° F) negli altri intervalli            |
| Accuratezza misura Scan     | ±0.3° C (0.5° F) nell'intervallo 22 ÷ 42.2° C<br>altri intervalli ±4% o ±2° C per valori maggiori |
| Alimentazione               | Interna con batteria al litio tipo CR2032                                                         |
| Anni di Garanzia            | 2                                                                                                 |
| Cartone di Spedizione       | 6                                                                                                 |



8 054619 101117

CE 0123



## T-One

REF.

TR 100102



T-One è un termometro ad infrarossi NO-TOUCH ovvero che rileva la temperatura corporea a distanza (5cm dalla superficie corporea), in modo rapido ed accurato. Alla funzione di misurazione alle tempie, è stata inoltre aggiunta una funzione di misura per superfici e oggetti che l'utente può facilmente impostare.

ACCESSORI IN DOTAZIONE - Borsina per il trasporto  
- 2 batterie alcaline tipo AAA - 1.5V  
- Fornito in espositore da banco (6pz)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dimensioni             | cm 14,6 x 3,8 x 5,4               |
| Peso                   | 75 g                              |
| Metodo di Misurazione  | Infrarossi a distanza (NO-TOUCH)  |
| Precisione Misurazione | ±0.2 °C                           |
| Tempie                 | ±1 °C                             |
| Superfici ed Oggetti   |                                   |
| Alimentazione          | 2 x Batterie Alcaline - AAA, 1.5V |
| Anni di Garanzia       | 2                                 |
| Cartone di Spedizione  | 6 (in Display da banco)           |



8 033622 546405

CE 0123





# Termir4

REF. TR 100001

TERMIR-4 è un termometro ad infrarossi, in grado di svolgere 4 funzioni di misurazione: auricolare, alle tempie, scansione della temperatura dei liquidi/superfici e temperatura ambientale in stand-by. Dotato di un dispositivo di autodiagnosi di corretto funzionamento, è affidabile e veloce nella misurazione (auricolare in 1 sec.), permette di memorizzare fino a 9 misurazioni, con cronometro e datario.

ACCESSORI IN DOTAZIONE - Batteria al Litio del tipo CR2032  
- Copri sonda in plastica antiurto

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni ————— cm 14,6x3,8x5,4  
Peso ————— 75 g  
Metodo misurazione ————— Infrarossi  
Modalità orecchio —————  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  nell'intervallo  $35.5 \div 42^{\circ}\text{C}$   
—  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  negli altri intervalli di temperatura  
Modalità Fronte (tempie) —————  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  nell'intervallo  $36.0 \div 39.0^{\circ}\text{C}$   
—  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  negli altri intervalli di temperatura  
Modalità Scansione —————  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  nell'intervallo  $22 \div 42.2^{\circ}\text{C}$   
— Per gli altri  $\pm 4\%$  o  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  per valori maggiori  
Alimentazione ————— Batteria al Litio tipo CR2032  
Garanzia ————— 2 anni  
Cartone di spedizione ————— 40

CE 0123



# T-40 | T-40F | T-CLASSIC | T-FLAP

T-40 termometro digitale con punta rigida | T-40 F con punta flessibile impermeabile. T-CLASSIC\*\* e T-FLAP\*\* sono termometri in vetro che sfruttano la dilatazione termica di una lega liquida calibrata (senza mercurio). Il modello T-CLASSIC è dotato di custodia semplice, mentre il modello T-FLAP è dotato di custodia con "facilitatore" che permette il facile abbattimento della colonna di indicazione della temperatura.

| CARATTERISTICHE                 | T-40                      | T-40 F                    | T-CLASSIC                | T-FLAP                   |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tempo Misurazione Rettale       | 40 sec.*                  | 40 sec.*                  |                          |                          |
| Tempo Misurazione Orale         | 60 sec.*                  | 60 sec.*                  |                          |                          |
| Tempo Misurazione Ascellare     | 100 sec.*                 | 100 sec.*                 |                          |                          |
| Punta Flessibile 45°            |                           | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |
| Punta Impermeabile              |                           | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Memoria Ultima Misurazione      | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |
| Segnale Fine Misurazione        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |
| Numero di Misurazioni           | Max 20.000                | Max 20.000                |                          |                          |
| Precisione                      | 0,1°C                     | 0,1°C                     | 0,1°C                    | 0,1°C                    |
| Misurazioni                     | °Celsius - °Fahrenheit    | °Celsius - °Fahrenheit    |                          |                          |
| Spegnimento Automatico          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |
| Indicatore Pila Scarica         | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |                          |                          |
| Tipo di Batteria (sostituibile) | LR41 - 1.5V               | LR41 - 1.5V               |                          |                          |
| Peso                            | 10 gr                     | 12 gr                     | 7,2 gr                   | 7,2 gr                   |
| Cartone di spedizione           | 24 pz in Display da banco | 24 pz in Display da banco | 12                       | 12                       |
| Anni di Garanzia                | 2                         | 2                         | 2                        | 2                        |
| CODICE                          | TR 200100                 | TR 200200                 | TR 100200                | TR 100300                |

CE 0123



T-40



T-40 F



T-CLASSIC



T-FLAP



\* variabile da paziente a paziente  
\*\* IN ATTESA DI MARCATURA CE DATA:

**Magics****CE 0123**

REF.

MG 100000

MAGICS (MAGnetic InterCellular Stimulation) è un dispositivo medico di magnetoterapia ad alta/bassa frequenza. Apparecchiatura sicura e tecnologicamente all'avanguardia, è indicata per un uso sia professionale che domiciliare. Di facile utilizzo, è la soluzione ottimale per contrastare e risolvere efficacemente, attraverso l'emissione di onde elettromagnetiche, tutte le patologie sia acute che croniche. Dotato di tastiera numerica in policarbonato con 6 tasti funzioni.

**IN DOTAZIONE:**

- 2 antenne locali con elastico di posizionamento (cod. MGTHA002-A)
- 1 adattatore esterno 100-240V 50-60Hz per ricarica batteria (cod. MGALI001-I)
- 1 borsa per riporre l'apparecchiatura e gli accessori (cod. MGBOR001-SL)

**ACCESSORI OPTIONAL:**

- Fascia cervicale (cod. MGCER001) | Fascia lombare (cod. MGLOM001)
- Fascia spalla, gomito, ginocchio (cod. MGSGG001)
- Gambale (cod. MGGAM001) | Gilet (cod. MGGIL001)
- Guanto (cod. MGGUA001)
- Mascherina viso (cod. MGMAS001)
- Stuoia magnetica 160x190 cm (cod. MGSTU003)
- Stuoia magnetica 80x190 cm (cod. MGSTU002)
- Stuoia Total-Body 50x100 cm (cod. MGSTU001)

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                     | Batteria interna ricaricabile con capacità di 2A/12V (autonomia 5 ore circa) |
|                                   | 100 ÷ 240V 18VDC 500mA per ricarica della batteria con adattatore esterno    |
| Massima intensità campo magnetico | 50 Gauss                                                                     |
| Frequenza di oscillazione         | 6 ÷ 100 Hz. (Bassa frequenza)                                                |
|                                   | 100 ÷ 5.000 Hz. (Alta frequenza)                                             |
| Uscite per EMT                    | 4 bassa/alta frequenza                                                       |
| Dimensioni                        | 33 x 26 x 10 cm                                                              |
| Anni di Garanzia                  | 2                                                                            |
| Cartone di spedizione             | 3                                                                            |

**My-Tens****CE 0123**

REF.

TE 100100 MY-TENS

REF.

SP 0209 ADESIVI DI RICAMBIO MY-TENS confezione da 2 pz

MY-TENS è un innovativo cerotto adesivo elettrostimolatore per alleviare il dolore. Utilizza la tecnologia TENS (elettrostimolazione nervosa transcutanea) per trattare specificamente la zona dolorante. Attraverso l'uso del dispositivo, il dolore è alleviato bloccando i segnali di dolore trasferiti dalle fibre nervose al sistema nervoso centrale; il trattamento aumenta infatti la secrezione delle endorfine che riducono la percezione del dolore e i suoi effetti sul sistema nervoso centrale. MY-TENS e il gel adesivo di ricambio sono forniti in confezione appendibile e in espositore da banco per farmacia.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentazione         | Batteria CR2032 Litio 3V                        |
| Tensione applicata    | Max 90 Vpp - basati su un carico di 500 Ω ±-10% |
| Tempo Trattamento     | 20 minuti con autospegnimento                   |
| Forza degli impulsi   | 15 livelli di intensità regolabili              |
| Velocità impulsi      | 70Hz                                            |
| Ampiezza impulsi      | 200µs                                           |
| Dimensioni            | 131 x 72 x 10 mm                                |
| Anni di Garanzia      | 2                                               |
| Cartone di spedizione | 3                                               |



8 054619 100356





MAT-130 è un materasso antidecubito consigliato per la prevenzione delle piaghe da decubito di 1° stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, utilizzo e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in funzione del peso del paziente. Il materassino, realizzato in PVC atossico, viene gonfiato grazie all'apposito compressore, e sostiene il soggetto disteso fino a 130 kg. Facile da utilizzare, portatile e leggero il materassino contiene 130 celle a bolle d'aria.

## KIT DI RIPARAZIONE IN DOTAZIONE

- Materasso di ricambio REF. SP 0195
- Compressore di ricambio REF. SP 0196

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### COMPRESSORE

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Alimentazione              | 230V~ - 50Hz       |
| Emissione dell'Aria        | 4,5 l/min          |
| Variazione della Pressione | 30 mmHg ÷ 110 mmHg |
| Tempo del Ciclo            | 10 min             |
| Rumorosità                 | 31 dbA             |
| Potenza Assorbita          | 5W                 |
| Fusibile                   | 1A                 |
| Dimensioni                 | cm 24 x 12 x 9,5   |
| Peso                       | 1,4 Kg             |
| Anni di Garanzia           | 2                  |

### MATERASSO

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dimensioni      | cm 300 x 90 x 6,5     |
| Numero Celle    | 130                   |
| Materiale       | PVC (EN-71, atossico) |
| Spessore PVC    | 0,30 mm               |
| Colore          | beige                 |
| Portata Massima | 130 Kg                |



## CODICE

DE 620010 MAT 130





WithU è il dispositivo di allarme pensato per risolvere le situazioni di emergenza in ambito domestico, oppure presso uffici e negozi. WithU può essere usato facilmente da bambini, anziani o da chiunque necessiti aiuto e assistenza. WithU non richiede una linea telefonica fissa, utilizza un sistema di chiamata di emergenza GSM con SIM card telefonica (anche ricaricabile) che viene attivato in caso di allarme (premendo il pulsante wireless o il pulsante posizionato sulla centralina) e può innescare la chiamata verso 5 numeri di telefono precedentemente memorizzati. WithU riproverà per altre 5 volte in caso di mancata risposta. Permette di ricevere le chiamate in vivavoce (ideale, per esempio, per assicurarsi che la situazione sia tranquilla o per ascoltare ciò che succede nell'ambiente circostante).

### FUNZIONI OPERATIVE

- Comunicazione con rete GSM, senza bisogno di linea fissa.
- Selezione automatica di chiamata a 5 numeri di telefono preimpostati.
- Batteria di backup per funzionare circa 6 ore senza alimentazione esterna.
- Per il funzionamento del sistema è necessaria una scheda SIM per cellulari (anche di tipo ricaricabile).
- Allarme in caso di corrente alimentata scollegata.
- Invio messaggio di allarme SMS.
- Ascolto ambientale e chiamata vivavoce diretta.
- Programmazione semplice attraverso invio di SMS.
- Facile installazione e utilizzo.
- Pulsante per disattivare allarme.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Centrale GSM
- Pulsante wireless con cinturino da polso e laccetto per il collo
- Manuale d'uso italiano + guida rapida impostazione base
- Altoparlante esterno
- Alimentatore

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Alimentazione                   | 9V-12V DC        |
| Temperatura di funzionamento    | 10 °C ~ +40 °C   |
| Statici di corrente             | 20 mA            |
| Frequenza del pulsante wireless | 433 MHz          |
| Dimensioni Centrale Operativa   | 112 x 88 x 25 mm |
| Dimensioni Altoparlante         | 80 x 80 x 20 mm  |
| Dimensioni Pulsante Wireless    | 45 x 45 x 12 mm  |
| Anni di Garanzia                | 2                |
| Cartone di spedizione           | 1                |

### CODICE

RE WU100000 ————— WITHU



8 054619 102008




## Défilé

Bilancia elettronica equipaggiata con 4 sensori di alta qualità ed accuratezza  
Azzeramento, accensione e spegnimento automatico (in 10 secondi)  
Visualizzazione differenza di peso dall'ultima misura  
Selettore manuale dell'unità di peso preferita Kg o Lb  
Indicatori di batteria scarica e sovraccarico  
Piano di appoggio in VETRO temperato NERO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Portata Minima / Massima | 4,5 / 180 kg                             |
| Scala di gradazione      | 100 gr                                   |
| Dimensione schermo LCD   | 73 x 34 mm                               |
| Alimentazione            | 3V DC - 1 batteria tipo CR2032 (inclusa) |
| Durata Batteria          | 6 mesi (con 2 misurazioni al giorno)     |
| Dimensioni               | 302 x 302 x 17,5 mm                      |
| Peso                     | 1,52 kg (batterie incluse)               |
| Anni di Garanzia         | 2                                        |
| Cartone di Spedizione    | 1                                        |
| Codice                   | BL 100001                                |

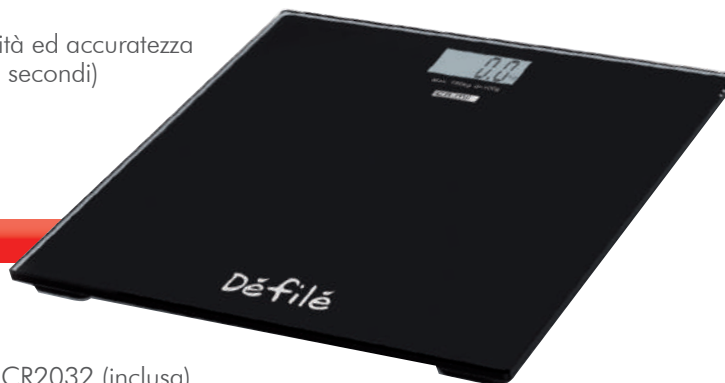


## Sprint

Bilancia elettronica in grado di misurare, calcolare e visualizzare 6 differenti parametri corporei:  
Peso | Massa Grassa | Indatazione Corporea | Massa Ossea | Massa Muscolare | Metabolismo Basale  
Settaggio e registrazione dei dati di 10 differenti utilizzatori  
Equipaggiata con 4 sensori di alta qualità ed accuratezza  
Azzeramento, accensione e spegnimento automatico (in 10 secondi)  
Indicatori di batteria scarica e sovraccarico  
Piano di appoggio in VETRO temperato NERO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Portata Minima / Massima | 3 / 180 kg                                         |
| Scala di gradazione      | 100 gr                                             |
| Dimensione schermo LCD   | 92 x 82 mm                                         |
| Alimentazione            | 3 x 1.5V DC batterie tipo AAA (non incluse)        |
| Durata Batteria          | 3.000 misurazioni o 6 mesi (con batterie alcaline) |
| Dimensioni               | 300 x 300 x 23,5 mm                                |
| Peso                     | 1,56 kg (batterie escluse)                         |
| Anni di Garanzia         | 2                                                  |
| Cartone di Spedizione    | 1                                                  |
| Codice                   | BL 100002                                          |

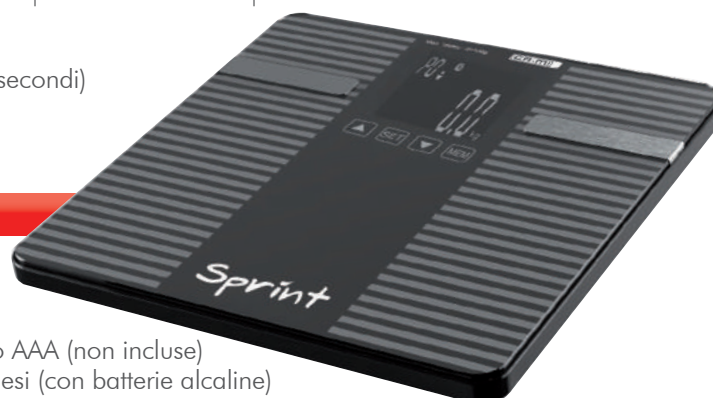

## Bamby

Bilancia elettronica equipaggiata con 4 sensori di alta qualità ed accuratezza  
Pulsanti di accensione e gestione delle funzioni peso istantaneo e tara  
Selettore manuale dell'unità di peso preferita  
Con funzioni automatiche di azzeramento e di spegnimento  
Indicatori di batteria scarica e sovraccarico  
Piano di appoggio in ABS GIALLO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Portata Minima / Massima | 0,5 / 20 kg                              |
| Scala di gradazione      | 5 gr                                     |
| Dimensione schermo LCD   | 72 x 28 mm                               |
| Alimentazione            | 3V DC - 1 batteria tipo CR2032 (inclusa) |
| Durata Batteria          | 3000 misurazioni                         |
| Dimensioni               | 560 x 330 x 53 mm                        |
| Peso                     | 4,5 kg (batterie incluse)                |
| Anni di Garanzia         | 2                                        |
| Cartone di Spedizione    | 2                                        |
| Codice                   | BL 100003                                |



## APPLICAZIONI

Ostetricia

Reparto / Corsia

Uso Domiciliare



CE 0123

NEW MAMILAT è un tiralatte elettrico adatto per il prelievo di latte materno dal seno. Particolarmente adatto per l'impiego ospedaliero, in reparti di maternità, o a domicilio. Dispositivo equipaggiato con vuotometro (bar & kPa) e regolatore di vuoto posti sul pannello frontale.

Dispositivo con grado di protezione IP21 e conforme alla norma EN 60601-1-11 "per utilizzo in ambiente domiciliare".

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Biberon di raccolta da 110ml + Biberon da 240ml
- Coppetta Tiralatte
- Tubo Aria
- Filtro antibatterico ed idrofobico (monopaziente)
- Set tubi silicone 6x10mm

## OPTIONAL

- Tubo Aria (SP0092/01)
- Filtro antibatterico ed idrofobico (SP 0046)
- Biberon 240ml + Coppetta Tiralatte (DC520011/02)
- Biberon 110ml e 240ml + Coppetta Tiralatte (DC 520012)
- Kit completo di tutti gli accessori (SP 0044)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                              |        |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |        |            |
| Alimentazione                | 230V / 50Hz                                                  |        |            |
| Potenza Assorbita            | 184VA                                                        |        |            |
| Classificazione ISO 10079-1  | MEDIO VUOTO / BASSO FLUSSO                                   |        |            |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.33 Bar                                                    | -33kPa | - 248 mmHg |
| Flusso d'Aria Libero         | 14 l/min                                                     |        |            |
| Grado Protezione IP          | IP21                                                         |        |            |
| Rumorosità                   | 63,0 dB                                                      |        |            |
| Funzionamento                | Ton: 20min / Toff: 40 min                                    |        |            |
| Peso                         | Kg 2.20                                                      |        |            |
| Dimensioni                   | cm 23 x 19 x 16                                              |        |            |
| Anni di Garanzia             | 2                                                            |        |            |
| Cartone di Spedizione        | 4                                                            |        |            |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                       |        |            |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CODICE

DC 620010 — NEW MAMILAT



8 033622 540526

# NEW ASPIRET

ASPIRATORE CHIRURGICO

35

## APPLICAZIONI

ORL

Reparto / Corsia

Tracheostomia

Uso Domiciliare



CE 0123

NEW ASPIRET è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia, pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio.

Fornito di indicatore (in bar e kPa) e regolatore di vuoto.

Dispositivo con grado di protezione IP21 e conforme alla norma EN 60601-1-11 "per utilizzo in ambiente domiciliare".

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

## OPTIONAL

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili")
- Tubi in Silicone Autoclavabili 6x10 + Connettore Conico ø 8-9-10 mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)
- Cannula CH20
- Cavo di alimentazione con Spina Shuko
- Carrello con ruote REF 27731

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |
| Alimentazione                | 230V-50Hz                                                    |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / BASSO FLUSSO                                    |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg                                  |
| Flusso d'Aria Libero         | 15 l/min                                                     |
| Rumorosità                   | 59,6 dBA                                                     |
| Funzionamento                | Continuo                                                     |
| Peso                         | Kg 2.20                                                      |
| Dimensioni                   | cm 23 x 19 x 16                                              |
| Anni di Garanzia             | 2                                                            |
| Cartone di spedizione        | 4                                                            |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                       |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 310001 NEW ASPIRET con Vaso autoclavabile da 1000ml in polycarbonato
- RE 310001/01 NEW ASPIRET con Vaso autoclavabile da 2000ml in polycarbonato
- RE 310002 NEW ASPIRET con Vaso riutilizzabile e Sacca monuoso Flovac® da 1000ml
- RE 310002/01 NEW ASPIRET con Vaso riutilizzabile e Sacca monuoso Flovac® da 2000ml
- Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta



## APPLICAZIONI

ORL

Reparto / Corsia

Tracheostomia

Uso Domiciliare

CE 0123

NEW ASKIR 20 è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia, pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio.

Fornito di indicatore (in bar e kPa) e regolatore di vuoto.

Dispositivo con grado di protezione IP21 e conforme alla norma EN 60601-1-11 "per utilizzo in ambiente domiciliare".

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

## OPTIONAL

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili")
- Tubi in Silicone Autoclavabili 6x10 + Connettore Conico ø 8-9-10 mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)
- Cannula CH20
- Cavo di alimentazione con Spina Shuko
- Carrello con ruote REF 27730

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |
| Alimentazione                | 230V-50Hz                                                    |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / BASSO FLUSSO                                    |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.75 Bar    -75 kPa    -563 mmHg                            |
| Flusso d'Aria Libero         | 16 l/min                                                     |
| Rumorosità                   | 60,5 dB                                                      |
| Funzionamento                | Continuo                                                     |
| Peso                         | Kg 2.50                                                      |
| Dimensioni                   | cm 35 x 21 x 18                                              |
| Anni di Garanzia             | 2                                                            |
| Cartone di spedizione        | 3                                                            |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                       |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 310100/12 NEW ASKIR 20 con Vaso autoclavabile da 1000ml in polycarbonato
- RE 310100/13 NEW ASKIR 20 con Vaso autoclavabile da 2000ml in polycarbonato
- RE 310101/12 NEW ASKIR 20 con Vaso riutilizzabile e Sacca monuoso Flovac® da 1000ml
- RE 310101/13 NEW ASKIR 20 con Vaso riutilizzabile e Sacca monuoso Flovac® da 2000ml
- Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta



# NEW ASKIR 30

ASPIRATORE CHIRURGICO

37

## APPLICAZIONI

Chirurgia Generale

Endoscopia

Gastroenterologia

Ostetricia

Reparto / Corsia

Uso Domiciliare

Veterinaria



CE 0123

NEW ASKIR 30 è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia, pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio.

Fornito di indicatore (in bar e kPa) e regolatore di vuoto.

Dispositivo con grado di protezione IP21 e conforme alla norma EN 60601-1-11 "per utilizzo in ambiente domiciliare".

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

## OPTIONAL

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili")
- Tubi in Silicone Autoclavabili 6x10 + Connettore Conico ø 8-9-10 mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)
- Cannula CH20
- Cavo di alimentazione con Spina Shuko
- Carrello con ruote REF 27730

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |
| Alimentazione                | 230V-50Hz                                                    |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO                                     |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.80 Bar    -80 kPa    -600 mmHg                            |
| Flusso d'Aria Libero         | 40 l/min                                                     |
| Rumorosità                   | 60,5 dB                                                      |
| Funzionamento                | Continuo                                                     |
| Peso                         | Kg 3.60                                                      |
| Dimensioni                   | cm 35 x 21 x 18                                              |
| Anni di Garanzia             | 2                                                            |
| Cartone di spedizione        | 3                                                            |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                       |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 310100/02 NEW ASKIR 30 con Vaso autoclavabile da 1000ml in polycarbonato
- RE 310100/03 NEW ASKIR 30 con Vaso autoclavabile da 2000ml in polycarbonato
- RE 310101/02 NEW ASKIR 30 con Vaso riutilizzabile e Sacca monuoso Flovac® da 1000ml
- RE 310100/53 NEW ASKIR 30 con Vaso riutilizzabile e Sacca monuoso Flovac® da 2000ml
- Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta



**PROXIMITY**  
NO-TOUCH ON/OFF

## APPLICAZIONI

Chirurgia Generale

Endoscopia

Gastroenterologia

Ostetricia

Reparto / Corsia

Uso Domiciliare

Veterinaria

CE 0123

NEW ASKIR 30 PROXIMITY è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia, pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio. Fornito di indicatore di vuoto (in bar e kPa) e regolatore di vuoto. La funzione PROXIMITY, che permette l'accensione e/o spegnimento del dispositivo senza contatto, evita la contaminazione incrociata. Dispositivo con grado di protezione IP21 e conforme alla norma EN 60601-1-11 "per utilizzo in ambiente domiciliare".

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

## OPTIONAL

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili")
- Tubi in Silicone Autoclavabili 6x10 + Connettore Conico ø 8-9-10 mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)
- Cannula CH20
- Cavo di alimentazione con Spina Shuko
- Carrello con ruote REF 27730

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |
| Alimentazione                | 230V-50Hz                                                    |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO                                     |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.80 Bar    -80 kPa    -600 mmHg                            |
| Flusso d'Aria Libero         | 40 l/min                                                     |
| Rumorosità                   | 60,5 dB                                                      |
| Funzionamento                | Continuo                                                     |
| Peso                         | Kg 3.60                                                      |
| Dimensioni                   | cm 35 x 21 x 18                                              |
| Anni di Garanzia             | 2                                                            |
| Cartone di spedizione        | 3                                                            |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                       |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 310100/55 NEW ASKIR 30 PROXIMITY con Vaso Autoclavabile da 1000ml (Makrolon 2858)
- RE 310100/56 NEW ASKIR 30 PROXIMITY con Vaso Autoclavabile da 2000ml (Makrolon 2858)
- Vasi riutilizzabili e Sacche monouso Flovac® disponibili a richiesta
- Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta

# NEW ASKIR 230/12V BR

ASPIRATORE CHIRURGICO

39

## APPLICAZIONI

Emergenza

Uso Domiciliare

Mobilità Pazienti

Reparto / Corsia

Tracheostomia

Veterinaria



Batteria  
Interna  
Ricaricabile

CE 0123

NEW ASKIR 230/12V BR è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Può funzionare con tre tipi di alimentazione: con alimentatore AC/DC in dotazione, con alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A) o con cavetto accendisigari per auto (12V 4A) approvato per uso continuo. Il dispositivo è dotato di allarme acustico ed indicazione visiva (LED) per indicazione stato batteria in scarica, ed è equipaggiato con vuotometro (bar & kPa) e regolatore di vuoto.

Dispositivo con grado di protezione IP21 e conforme alla norma EN 60601-1-11 "per utilizzo in ambiente domiciliare".

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili")
- Tubi in Silicone Autoclavabili 6x10 + Connettore Conico ø 8-9-10 mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)
- Sonda Aspirazione CH20
- Alimentatore AC/DC universale con presa Europa + Cavetto Accendisigari 12V DC

## OPTIONAL

- Carrello con ruote REF 27730
- Borsa da Trasporto\* REF SP 0207

\*per Dispositivo e Consumabili

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione)                                   |
| Alimentazione                | 14V --- 4A con Adattatore Universale AC/DC mod. UE60-140429SPA1 (100-240V~ - 50/60Hz - 100VA)  |
|                              | — Batteria Interna Ricaricabile al Pb (12V --- 4A) - Autonomia 80 min - Tempo ricarica 240 min |
|                              | — Cavetto Accendisigari per Auto (12V --- 1,9A)                                                |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / BASSO FLUSSO                                                                      |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg                                                                    |
| Flusso d'Aria Libero         | 16 l/min                                                                                       |
| Rumorosità                   | 63,0 dB                                                                                        |
| Funzionamento                | Continuo                                                                                       |
| Peso                         | Kg 3.50                                                                                        |
| Dimensioni                   | cm 35 x 21 x 18                                                                                |
| Anni di Garanzia             | 2                                                                                              |
| Cartone di spedizione        | 3                                                                                              |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                                                         |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 310211 NEW ASKIR 230/12V BR con Vaso autoclavabile da 1000ml in polycarbonato
- RE 310211/01 NEW ASKIR 230/12V BR con Vaso autoclavabile da 2000ml in polycarbonato
- Vasi riutilizzabili e Sacche monouso Flovac® disponibili a richiesta
- Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta



## APPLICAZIONI

Ambulanza

Emergenze

Mobilità Pazienti

Reparto / Corsia

Tracheostomia

Uso Domiciliare

Veterinaria

Batteria  
Interna  
Ricaricabile

CE 0123

ASKIR 36BR è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Per uso professionale e con una aspirazione max di 36l/min, ASKIR BR è leggero e può essere facilmente trasportabile. Può funzionare con tre tipi di alimentazione: con alimentatore AC/DC in dotazione, alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A) o con cavetto accendisigari per auto (12V 4A), ed è approvato per uso CONTINUO senza surriscaldamenti. Fornito con allarme acustico e indicazione visiva (LED) per indicazione dello stato batteria in scarica, il dispositivo è fornito di vuotometro (bar e kPa) e regolatore di vuoto. Dispositivo conforme alla norma EN 60601-1-11 "Prescrizioni per apparecchi elettromedicali per uso domiciliare".

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili")
- Tubi in Silicone Autoclavabili 8x14 + Connettore Conico Ø 10-11-12mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)
- Alimentatore Universale con presa Europa
- Cavo per auto 12V

## OPTIONAL

- Carrello con ruote REF 27730
  - Borsa da Trasporto\* REF SP 0207
- \*per Dispositivo e Consumabili

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione)                                |
| Alimentazione                | 14V --- 4A con alimentatore AC/DC (input: 100-240V~ - 50/60Hz - 100VA) in dotazione         |
|                              | — Batteria Interna Ricaricabile Pb (12V --- 4A) - Autonomia 60 min - Tempi Ricarica 240 min |
|                              | — (12V --- 4A) Cavo per auto Accendisigari                                                  |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO                                                                    |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg                                                                 |
| Flusso d'Aria Libero         | 36 l/m (senza vaso)                                                                         |
| Rumorosità                   | 65,5 dBA (con vaso) / 68,5 dBA (senza vaso)                                                 |
| Peso                         | Kg 4.39                                                                                     |
| Dimensioni                   | cm 35 x 21 x 18                                                                             |
| Anni di Garanzia             | 2                                                                                           |
| Cartone di Spedizione        | 3                                                                                           |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                                                      |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 410200/03 — ASKIR 36 BR (aliment. AC/DC UE60-140429SPA1) con vaso 1000ml autoclavabile in PC (conforme EN 60601-1-11)
- RE 410200/09 — ASKIR 36 BR (aliment. AC/DC UE60-140429SPA1) con vaso 2000ml autoclavabile in PC (conforme EN 60601-1-11)
- RE 410201 — ASKIR 36 BR (aliment. AC/DC UE60-140429SPA1) con Liner Flovac® 1000ml e vaso riutilizzabile
- RE 410201/01 — ASKIR 36 BR (aliment. AC/DC UE60-140429SPA1) con Liner Flovac® 2000ml e vaso riutilizzabile
- Vaso in APEC® autoclavabile a 143°C disponibile su richiesta



# NEW ASKIR 118

ASPIRATORE CHIRURGICO

41

## APPLICAZIONI

Uso Domiciliare

Mobilità Pazienti

Reparto / Corsia

Tracheostomia

Veterinaria



CE 0123

NEW ASKIR 118 è un dispositivo medico elettrico adatto per l'aspirazione nasale, orale e tracheale di liquidi corporei adatto ad uso adulti e pediatrico. Il dispositivo è particolarmente adatto per l'uso in corsia ospedaliera, per applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post - operatori in ambito privato (home-care). Il grande display LCD agevola l'utilizzo del dispositivo e, col supporto degli appositi pulsanti, ne aumenta la precisione d'aspirazione. La batteria al Litio-Ione di cui è dotato assicura una lunga durata grazie anche al sistema innovativo denominato Feedback, che garantisce un utilizzo intelligente controllando e regolando automaticamente la potenza di aspirazione con conseguente aumento di durata della batteria e una diminuzione del rumore prodotto. La funzione "PROXIMITY" permette di attivare o disattivare il dispositivo con semplice gesto a distanza ravvicinata e quindi senza contatto e previene ed evita la contaminazione incrociata tra i pazienti che si avvicinano nei diversi interventi. Disponibile con vasi in polycarbonato autoclavabile (121°C), con vasi e sacche monouso FLOVAC® o con vasi in APEC® resistenti alla temperatura di 143°C. Dispositivo con grado di protezione IP21 e conforme alla norma EN 60601-1-11 "per utilizzo in ambiente domiciliare".

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno
- Tubi in Silicone Autoclavabili 8x14mm + Connettore Conico ø 10-11-12mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)
- Cannula CH20
- Cavetto Accendisigari per auto 12V
- AC/DC Universale + Cavo alimentazione

## OPTIONAL

- Borsa per il trasporto



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                | 14V === 4A con alimentatore AC/DC mod. UE60-140429SPA1 (input: 100-240V~ - 50/60Hz - 100VA) |
|                              | — Batteria interna Litio-Ione (14,8 V === 5,2A) Autonomia 70 minuti - Ricarica 360 minuti   |
|                              | — Cavetto accendisigari per auto (12V === 4A)                                               |
| Motore brushless             | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione)                                |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO                                                                    |
| Aspirazione Max (regolabile) | -75 kPa    -563 mmHg    -0.75 Bar                                                           |
| Grado di Protezione          | IP 21 (EN 60601-1-11)                                                                       |
| Flusso d'Aria Libero         | 26 l/min                                                                                    |
| Funzionamento                | Continuo                                                                                    |
| Peso                         | Kg 2.70                                                                                     |
| Dimensioni                   | 35 x 19 (h) x 15 cm                                                                         |
| Anni di Garanzia             | 2                                                                                           |
| Cartone di Spedizione        | 4                                                                                           |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                                                      |



Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 410151 — NEW ASKIR 118 - con vaso autoclavabile 1000ml in PC
- RE 410151/01 — NEW ASKIR 118 - con vaso autoclavabile 2000ml in PC

## APPLICAZIONI

Ambulanza

Emergenze



CE 0123

NEW ASKIR 118 WM è un dispositivo medico elettrico adatto per l'aspirazione nasale, orale e tracheale di liquidi corporei adatto ad uso adulti e pediatrico. E' di forma elegantemente stretta ed è stato progettato per poter essere utilizzato nei veicoli sanitari e per l'emergenza.

Il grande display LCD agevola l'utilizzo del dispositivo e, col supporto degli appositi pulsanti, ne aumenta la precisione d'aspirazione. La batteria al Litio-Ione di cui è dotato il dispositivo assicura una lunga durata grazie anche al sistema innovativo denominato Feedback, che garantisce un utilizzo intelligente controllando e regolando automaticamente la potenza di aspirazione con conseguente aumento di durata della batteria e una diminuzione del rumore prodotto.

La funzione "PROXIMITY", che permette di attivare o disattivare il dispositivo con semplice gesto a distanza ravvicinata e quindi senza contatto, previene ed evita la contaminazione incrociata tra i pazienti che si avvicinano nei diversi interventi. Disponibile in varie configurazioni: con vasi in policarbonato autoclavabile (121°C), con vasi e sacche monouso FLOVAC® o con vasi in APEC® resistenti alla temperatura di 143°C.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno
- Tubi in Silicone Autoclavabili 8x14 + Connettore Conico ø 10-11-12mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)
- Cannula CH20
- Staffa per ambulanza Mod. Askir 118 Support
- Borsa per il trasporto (inclusa)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                | Batteria interna Litio-Ione (14,8 V --- 5,2A) Autonomia 70 minuti - Ricarica 360 minuti |
|                              | — Staffa ambulanza mod. ASKIR 118 SUPPORT (12V --- 4A)                                  |
| Motore brushless             | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione)                            |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO                                                                |
| Aspirazione Max (regolabile) | -75 kPa    -563 mmHg    -0.75 Bar                                                       |
| Flusso d'Aria Libero         | 26 l/min                                                                                |
| Funzionamento                | Continuo                                                                                |
| Peso                         | Kg 2.70                                                                                 |
| Dimensioni                   | 35 x 19 (h) x 15 cm                                                                     |
| Anni di Garanzia             | 2                                                                                       |
| Cartone di Spedizione        | 4                                                                                       |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                                                  |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 410150 — NEW ASKIR 118 WM - con vaso autoclavabile 1000ml in PC
- RE 410150/01 — NEW ASKIR 118 WM - con vaso autoclavabile 2000ml in PC

## APPLICAZIONI

Emergenza

Luoghi pubblici

Scuole

Teatri

Palestre

Centri Commerciali

Aerei / Navi / Treni

Parchi Divertimento



## NT-180 | HeartPlus™

NT-180 (HeartPlus™) è un defibrillatore semiautomatico esterno che riavvia il battito cardiaco nei pazienti con arresto cardiaco improvviso (SCA). NT-180 (HeartPlus™) è un dispositivo medico di emergenza adatto per le società sportive, per i luoghi pubblici come scuole, teatri, palestre, stadi, centri commerciali, farmacie, aerei, navi da crociera ed in generale in tutti i luoghi di aggregazione. Questo prodotto è portatile con funzionamento a batteria. È leggero e di facile utilizzo in quanto l'utente è guidato in tutte le fasi mediante chiari comandi vocali e spie luminose sul pannello frontale. Il defibrillatore semiautomatico esterno NT-180 (HeartPlus™) può essere usato su pazienti adulti e bambini; è sufficiente selezionare la modalità "adulto" o "bambino" tramite apposito pulsante. Dopo aver applicato gli elettrodi al paziente, il defibrillatore esegue l'analisi del ritmo cardiaco ECG ed identifica la necessità o meno di erogare una scarica elettrica. Tutti i dati dell'intervento sono registrati nella sua memoria interna. Tramite apposito software è possibile acquisire tali dati (parametri ECG e suoni ambientali) a PC.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Batteria del tipo all-in-one (batteria con elettrodi inclusi e collegati)
- Borsa per trasporto
- Asciugamano
- CD-ROM
- Cavo USB

## OPTIONAL

- Batteria del tipo staccabile (batteria con elettrodi a parte)
- Elettrodi da collegare

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Energia erogata                        | 180J (adulto con impedenza di 50 Ω) / 50J (bambino con impedenza 50 Ω)    |
| Tempo di carica per erogare la scossa  | meno di 13 secondi                                                        |
| Metodo di erogazione scossa            | tramite pulsante manuale                                                  |
| Funzionamento                          | tramite istruzioni visive ed acustiche all'operatore                      |
| Alimentazione                          | batteria non ricaricabile (LiMnO2)                                        |
| Autonomia batteria                     | 180 scosse a 25°C, 130 scosse a 0°C                                       |
| Anni di garanzia della batteria        | 2 (confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente)              |
| Acquisizione dati                      | archivio dei dati di analisi e dei suoni ambientali nella memoria interna |
| Condizioni ambientali di funzionamento | da 0°C a 40°C ed umidità relativa dal 10% al 95%                          |
| Condizioni ambientali di stoccaggio    | da -20°C a 60°C                                                           |
| Classe di protezione                   | IPX2                                                                      |
| Dimensione                             | cm 29,3 x 29,1 x 7,1                                                      |
| Peso                                   | kg 1.9 (batteria inclusa)                                                 |
| Anni di garanzia                       | 5                                                                         |
| Cartone di spedizione                  | 2                                                                         |

CE 0120

## CODICE

## RDM

## CND

NT-180 (HeartPlus™)

1431272

Z12030599



## APPLICAZIONI

Ambulanza

Emergenze

Ospedali da Campo

Ostetricia

CE 0123

NEW EMIVAC è un aspiratore portatile azionato a pedale per interventi d'emergenza che non necessita lubrificanti o sostituzioni di batteria. Adatto ad interventi delicati come l'aspirazione tracheale o su bambini, può raggiungere i 300 mmHg di aspirazione massima. Dotato di vaso autoclavabile da 400 ml con valvola di sicurezza di troppo pieno.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno
- Tubi in Silicone Autoclavabili 6x10 + Connettore Conico ø 8-9-10mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentazione                | Manuale (a pedale)                |
| Classificazione ISO 10079-2  | VUOTO MEDIO - 22l/min             |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.40 Bar    -40 kPa    -300 mmHg |
| Flusso d'Aria Libero         | 22 l/m                            |
| Funzionamento                | A pedale                          |
| Peso                         | Kg 1.15                           |
| Dimensioni                   | cm 22 x 16 x 8                    |
| Anni di Garanzia             | 2                                 |
| Cartone di Spedizione        | 6                                 |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                            |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

RE 310300 — NEW EMIVAC con Vaso autoclavabile da 400ml in polycarbonato



# ASKIR C30 BR

ASPIRATORE CHIRURGICO CARRELLATO

45

## APPLICAZIONI

Chirurgia Generale

Emergenze

Endoscopia

Gastroenterologia

Odontoiatria

Ostetricia

Reparto / Corsia



Batteria  
Interna  
Ricaricabile

CE 0123

ASKIR C30 BR è un aspiratore portatile per l'aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Per uso professionale e con una aspirazione max di 36l/min, l'ASKIR C30 BR è dotato di doppio vaso di raccolta liquidi e carrello con cinque ruote per comoda mobilità. Può funzionare con due diverse modalità: con alimentatore AC/DC in dotazione o con alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A), ed è approvato per uso CONTINUO senza surriscaldamenti. Fornito con allarme acustico e indicazione visiva (LED) per indicazione dello stato batteria in scarica, il dispositivo è fornito di vuotometro (bar e kPa) e regolatore di vuoto.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili")
- Tubi in Silicone Autoclavabili 8x14 + Connettore Conico ø 10-11-12mm
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)
- Alimentatore Universale con presa Europa

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore ————— Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione)  
Alimentazione ————— 14V --- 4A con Adattatore Universale AC/DC mod. UE60-140429SPA1 (100-240V~ - 50/60Hz - 100VA)  
— Batteria Interna Ricaricabile Pb (12V --- 4A) - Autonomia 60 min - Tempi Ricarica 240 min

Classificazione ISO 10079-1 — ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO  
Aspirazione Max (regolabile) — -0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg  
Flusso d'Aria Libero — 36 l/m (senza vaso)  
Rumorosità — 65,5 dBA (con vaso) / 68,5 dBA (senza vaso)  
Peso — Kg 7.89  
Dimensioni — cm 32 x 30 x 99  
Anni di Garanzia — 2  
Cartone di Spedizione — 1  
Luogo di Fabbricazione — Italia

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

RE 410251 ————— ASKIR C30 BR con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato  
— Vasi riutilizzabili e Sacche monouso Flovac® disponibili a richiesta  
— Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta



## APPLICAZIONI

Chirurgia Generale

Emergenze

Endoscopia

Gastroenterologia

Odontoiatria

Reparto / Corsia

CE 0123

ASKIR C30 è un aspiratore portatile per l'aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Per uso professionale e con una aspirazione max di 40l/min, l'ASKIR C30 è dotato di doppio vaso di raccolta liquidi e carrello con cinque ruote per comoda mobilità. Il dispositivo è fornito di vuotometro (bar e kPa) e regolatore di vuoto.

## MODELLI DISPONIBILI e ACCESSORI IN DOTAZIONE

|                                                                                           | BASIC | FS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili") | o     | o  |
| Tubi in Silicone Autoclavabili 8x14 + Connettore Conico ø 10-11-12mm                      | o     | o  |
| Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)                                        | o     | o  |
| Cavo di alimentazione con Spina Shuko                                                     | o     | o  |
| Controllo a pedale (può essere ordinato separatamente)                                    |       | o  |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |
| Alimentazione                | 230V-50Hz                                                    |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO                                     |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.80 Bar    -80 kPa    -600 mmHg                            |
| Flusso d'Aria Libero         | 40 l/min                                                     |
| Rumorosità                   | 61,5 dBA                                                     |
| Funzionamento                | Continuo                                                     |
| Peso                         | Kg 6.20                                                      |
| Dimensioni                   | cm 32 x 99 x 30                                              |
| Anni di Garanzia             | 2                                                            |
| Cartone di Spedizione        | 1                                                            |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                       |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

|              |                 |                                                                        |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| RE 410250    | ASKIR C30 BASIC | con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato                    |
| RE 410250/01 | ASKIR C30 FS    | con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato + Comando a pedale |
| RE 410250/10 | ASKIR C30 BASIC | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 2000ml         |
|              |                 | — Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta     |

# NEW HOSPIVAC 350

ASPIRATORI CHIRURGICI CARRELLATI

47

## APPLICAZIONI

Chirurgia Generale

Emergenze

Ginecologia

Liposuzione

Neurochirurgia

Odontoiatria

Ostetricia

Sala Operatoria



CE 0123

NEW HOSPIVAC 350 è indicato nell'aspirazione professionale di liquidi, tessuti o frammenti di ossa in pazienti durante o successivamente ad un intervento chirurgico. La pompa a secco di ultima generazione assicura prestazioni ottimali, grazie all'elevata capacità d'aspirazione e alla rapidità di raggiungimento del vuoto massimo, senza bisogno di manutenzione. La semplicità d'utilizzo della plancia comandi e la varietà di configurazioni e accessori fanno della serie HOSPIVAC il dispositivo ideale nell'aspirazione chirurgica e nella liposuzione.

| MODELLI DISPONIBILI e ACCESSORI IN DOTAZIONE                                              | BASIC | FS | FULL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili") | o     | o  | o    |
| Tubi in Silicone Autoclavabili 8x14mm + Connettore Conico ø 10-11-12mm                    | o     | o  | o    |
| Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)                                        | o     | o  | o    |
| Cavo di alimentazione con Spina Shuko                                                     | o     | o  | o    |
| Controllo a pedale (può essere ordinato separatamente)                                    |       | o  | o    |
| Deviatore elettronico tra un vaso e l'altro                                               |       |    | o    |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |
| Alimentazione                | 230V-50Hz                                                    |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO                                     |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.90 Bar    -90 kPa    -675 mmHg                            |
| Flusso d'Aria Libero         | 60 l/min                                                     |
| Rumorosità                   | 51,7 dBA                                                     |
| Funzionamento                | Continuo                                                     |
| Peso                         | Kg 13                                                        |
| Dimensioni                   | cm 46 x 85 x 42                                              |
| Anni di Garanzia             | 2                                                            |
| Cartone di Spedizione        | 1                                                            |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                       |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

|              |                                                                  |                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RE 410356    | NEW HOSPIVAC 350 BASIC 2                                         | con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato            |
| RE 410356/06 | NEW HOSPIVAC 350 FS 2                                            | con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato            |
| RE 410356/01 | NEW HOSPIVAC 350 FULL 2                                          | con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato            |
| RE 410356/39 | NEW HOSPIVAC 350 BASIC 5                                         | con 2 Vasi autoclavabili da 5000ml in polycarbonato            |
| RE 410356/40 | NEW HOSPIVAC 350 FS 5                                            | con 2 Vasi autoclavabili da 5000ml in polycarbonato            |
| RE 410356/41 | NEW HOSPIVAC 350 FULL 5                                          | con 2 Vasi autoclavabili da 5000ml in polycarbonato            |
| RE 410356/27 | NEW HOSPIVAC 350 FLOVAC BASIC 2                                  | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 2000ml |
| RE 410356/29 | NEW HOSPIVAC 350 FLOVAC FS 2                                     | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 2000ml |
| RE 410356/28 | NEW HOSPIVAC 350 FLOVAC FULL 2                                   | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 2000ml |
| RE 410356/02 | NEW HOSPIVAC 350 FLOVAC BASIC 3                                  | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 3000ml |
| RE 410356/09 | NEW HOSPIVAC 350 FLOVAC FS 3                                     | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 3000ml |
| RE 410356/30 | NEW HOSPIVAC 350 FLOVAC FULL 3                                   | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 3000ml |
|              | Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta |                                                                |



## APPLICAZIONI

Chirurgia Generale

Emergenze

Ginecologia

Liposuzione

Neurochirurgia

Odontoiatria

Ostetricia

Sala Operatoria

CE 0123

NEW HOSPIVAC 400 è indicato nell'aspirazione professionale di liquidi, tessuti o frammenti di ossa in pazienti durante o successivamente ad un intervento chirurgico. La pompa a secco di ultima generazione assicura prestazioni ottimali, grazie all'elevata capacità d'aspirazione e alla rapidità di raggiungimento del vuoto massimo, senza bisogno di manutenzione. La semplicità d'utilizzo della plancia comandi e la varietà di configurazioni e accessori fanno della serie HOSPIVAC il dispositivo ideale nell'aspirazione chirurgica e nella liposuzione.

| MODELLI DISPONIBILI e ACCESSORI IN DOTAZIONE                                              | BASIC | FS | FULL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno (dettagli in "configurazioni disponibili") | o     | o  | o    |
| Tubi in Silicone Autoclavabili 8x14mm + Connettore Conico ø 10-11-12mm                    | o     | o  | o    |
| Filtro Antibatterico ed Idrofobico (mono-paziente)                                        | o     | o  | o    |
| Cavo di alimentazione con Spina Shuko                                                     | o     | o  | o    |
| Controllo a pedale (può essere ordinato separatamente)                                    |       | o  | o    |
| Deviatore elettronico tra un vaso e l'altro                                               |       |    | o    |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione) |
| Alimentazione                | 230V-50Hz                                                    |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO                                     |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.90 Bar    -90 kPa    -675 mmHg                            |
| Flusso d'Aria Libero         | 90 l/min                                                     |
| Rumorosità                   | 46,4 dBA                                                     |
| Funzionamento                | Continuo                                                     |
| Peso                         | Kg 20                                                        |
| Dimensioni                   | cm 46 x 85 x 42                                              |
| Anni di Garanzia             | 2                                                            |
| Cartone di Spedizione        | 1                                                            |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                       |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

|              |                                                                  |                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RE 410350    | NEW HOSPIVAC 400 BASIC 2                                         | con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato            |
| RE 410350/09 | NEW HOSPIVAC 400 FS 2                                            | con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato            |
| RE 410350/01 | NEW HOSPIVAC 400 FULL 2                                          | con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato            |
| RE 410350/36 | NEW HOSPIVAC 400 BASIC 5                                         | con 2 Vasi autoclavabili da 5000ml in polycarbonato            |
| RE 410350/37 | NEW HOSPIVAC 400 FS 5                                            | con 2 Vasi autoclavabili da 5000ml in polycarbonato            |
| RE 410350/38 | NEW HOSPIVAC 400 FULL 5                                          | con 2 Vasi autoclavabili da 5000ml in polycarbonato            |
| RE 410350/08 | NEW HOSPIVAC 400 FLOVAC BASIC 2                                  | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 2000ml |
| RE 410350/03 | NEW HOSPIVAC 400 FLOVAC FS 2                                     | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 2000ml |
| RE 410350/11 | NEW HOSPIVAC 400 FLOVAC FULL 2                                   | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 2000ml |
| RE 410350/27 | NEW HOSPIVAC 400 FLOVAC BASIC 3                                  | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 3000ml |
| RE 410350/28 | NEW HOSPIVAC 400 FLOVAC FS 3                                     | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 3000ml |
| RE 410350/25 | NEW HOSPIVAC 400 FLOVAC FULL 3                                   | con 2 Vasi riutilizzabili e 2 Sacche monuoso Flovac® da 3000ml |
|              | Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta |                                                                |





## APPLICAZIONI

Chirurgia Generale

Emergenze

Ginecologia

Liposuzione

Ostetricia

Sala Operatoria

Batteria  
Interna  
Ricaricabile

NEW HOSPIVAC BR è indicato nell'aspirazione professionale di liquidi corporei, tessuti o frammenti in pazienti durante o successivamente ad un intervento chirurgico. Può funzionare con due tipi di alimentazione: a rete elettrica 220-230V / 50-60Hz, con apposito alimentatore AC/DC interno, o con alimentazione interna (Batteria al Piombo 12V --- 20A). Il Sistema di gestione elettronica posto sul pannello frontale permette di effettuare l'aspirazione tramite controllo a pedale e di poter eseguire l'aspirazione di liquidi in entrambi i vasi (deviatore elettronico) senza spegnere l'apparecchiatura. Fornito con allarme acustico e indicazione visiva (led luminoso) per indicazione stato batteria. Il dispositivo è predisposto con sensore di pressione che permette di gestire la velocità del motore quando viene rilevata la mancanza di depressione. Tale funzione consente di ottimizzare il consumo della batteria, la riduzione dei giri del motore (con tubo di aspirazione completamente aperto) e la riduzione del rumore.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 Vasi Autoclavabile con Valvola di troppo pieno
- 2 Tubi in Silicone trasparente Autoclavabili 8x14mm + 2 Connettori Conici ø 10-11-12mm
- 2 Filtri Antibatterici ed Idrofobici (mono-paziente)
- Cavo di alimentazione con Spina Shuko
- Controllo a Pedale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Motore                       | Motore 12V (no lubrificazione e/o manutenzione)                                 |
| Alimentazione                | 220-230V ~ 50-60Hz con alimentatore AC/DC interno                               |
|                              | Batteria interna al Pb (12V --- 20A) Autonomia 250 min - Tempi Ricarica 480 min |
| Potenza Assorbita            | 90VA                                                                            |
| Classificazione ISO 10079-1  | ALTO VUOTO / ALTO FLUSSO                                                        |
| Aspirazione Max (regolabile) | -0.85 Bar -85 kPa -637,5 mmHg                                                   |
| Flusso d'Aria Libero         | 50 l/min                                                                        |
| Funzionamento                | Continuo                                                                        |
| Peso                         | Kg 20                                                                           |
| Dimensioni                   | cm 46 x 85 x 42                                                                 |
| Anni di Garanzia             | 2                                                                               |
| Cartone di Spedizione        | 1                                                                               |
| Luogo di Fabbricazione       | Italia                                                                          |

Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 410400 — NEW HOSPIVAC BR con 2 Vasi autoclavabili da 2000ml in polycarbonato (Makrolon 2858)
- RE 410400/03 — NEW HOSPIVAC BR con 2 Vasi autoclavabili da 5000ml in polycarbonato (Makrolon 2858)
- RE 410400/01 — NEW HOSPIVAC BR con 2 Vasi riutilizzabili e Sacca monuoso Flovac® da 2000ml
- RE 410400/02 — NEW HOSPIVAC BR con 2 Vasi riutilizzabili e Sacca monuoso Flovac® da 3000ml
- Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta

## ASPIRET

ASKIR 20

ASKIR 36 BR

ASKIR 30

ASKIR 118

ASKIR 12V BR

ASKIR 118WM

EMIVAC

ASKIR C30

ASKIR C30 BR

HOSPIVAC 350

HOSPIVAC 400

HOSPIVAC BR

## SONDE d'ASPIRAZIONE



CH20

RE 210400 (10's)

RE 210400 (10's)

RE 210400 (10's)

## VENTOSE AL SILICONE



Lunghezza 210mm, Ø50mm, taglia XS

Lunghezza 210mm, Ø60mm, taglia S

Lunghezza 210mm, Ø70mm, taglia M

VC-95100

VC-95100

VC-95200

VC-95200

VC-95300

VC-95300

## VASI in MAKROLON® 2858 autoclavabili ad un massimo di 121°C



Vaso da 400 ml con Coperchio

RE 210301

Vaso da 1000 ml

RE 210003

RE 210003

Vaso da 1000 ml con Coperchio

RE 210001/02

RE 210001/02

Vaso da 2000 ml

RE 210353

RE 210353

RE 210353

RE 210353

Vaso da 2000 ml con Coperchio

RE 210351/01

RE 210351/01

RE 210351/01

RE 210351/01

Vaso da 4000 ml

RE 210007

Vaso da 4000 ml con Coperchio


RE 210006

Vaso da 5000 ml

RE 210013

Vaso da 5000 ml con Coperchio

RE 210010

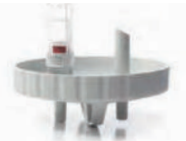

Coperchio per Vaso da 400 ml

RE 210302

Coperchio per Vaso da 1000 e 2000

RE 210352/01

RE 210352/01

RE 210352/01

RE 210352/01

Coperchio per Vaso da 4000 ml

RE 210008

Coperchio per Vaso da 5000 ml

RE 210012



O-ring per Coperchio 400 ml

RE 210304

O-ring per Coperchio 1000 e 2000

RE 210354

RE 210354

RE 210354

RE 210354

O-ring per Coperchio 4000 ml

RE 210306

O-ring per Coperchio 5000 ml

RE 210307

## VASI in APEC® autoclavabile ad un massimo di 143°C



Vaso da 1000 ml

RE 210002

RE 210002

Vaso da 1000 ml con Coperchio

RE 210009

RE 210009

Vaso da 2000 ml

RE 210253/01

RE 210253/01

RE 210253/01

RE 210253/01

Vaso da 2000 ml con Coperchio

RE 210351/05

RE 210351/05

RE 210351/05

RE 210351/05

Vaso da 5000 ml jar

RE 210013/01

Vaso da 5000 ml con Coperchio

RE 210010/01



Coperchio per Vaso da 1000 e 2000

RE 210352/02

RE 210352/02

RE 210352/02

RE 210352/02

Coperchio per Vaso da 5000 ml

RE 210012/01



O-ring per Coperchio 1000 e 2000

RE 210354

RE 210354

RE 210354

RE 210354

O-ring per Coperchio 5000 ml

RE 210307

## FILTRI (Antibatterici ed Idrofobici)



Ø 64 con Connettore da 8mm

SP 0046

SP 0046

Ø 64 con Connettore da 11mm

SP 0121

SP 0121

SP 0121 (per 350 e BR)

Ø 90 con Connettore da 11mm

SP 0047 (400)



**COPERCHIO RIGIDO** saldato ermeticamente alla sacca

## Flovac® Liner Monouso

disponibile da 1000ml / 2000ml / 3000ml

**PORTA PATIENT** per connettere il tubo paziente per la procedura di aspirazione

Tappo per chiudere la porta PATIENT prima dello smaltimento

**PORTA VACUUM** per collegare all'impianto centralizzato vacuum o all'aspiratore CA-MI

**PORTA TANDEM** per collegare più Liner in cascata

Tappo per la chiusura della porta TANDEM quando si utilizza un solo contenitore o prima dello smaltimento

## Flovac® Vaso Riutilizzabile

disponibile da  
1000ml / 2000ml / 3000ml

## SACCA MONOUSO

La moribida SACCA monouso è fabbricata in polietilene ed è ermeticamente saldata ad un coperchio rigido dotato al suo interno di filtro antibatterico, idrofobico e antiriflusso. Il filtro agisce anche come valvola di troppo pieno, interrompendo l'aspirazione qualora si raggiunga la massima capacità di raccolta. La sacca si utilizza posizionata all'interno del proprio contenitore rigido FLOVAC®, realizzato in polycarbonato autoclavabile e riutilizzabile. Il sistema FLOVAC® costituisce un'ottima alternativa ai vasi autoclavabili, diminuendo i costi di pulizia e sterilizzazione. Una gamma completa di accessori fanno di FLOVAC® il partner ideale nella raccolta dei secreti.

## FLOVAC® LINER - CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiale del coperchio              | HDPE (polyethylene ad alta densità)                     |
| Porta "VACUUM"                       | Ø 8.0 ÷ 9.2 mm con valvola ON-OFF                       |
| Porta "PATIENT"                      | Ø 14.0 ÷ 15.5 (Ø 8.0 ÷ 9.2 mm on connettore ad angolo)  |
| Porta "TANDEM"                       | Ø 8.0 ÷ 9.2 mm                                          |
| Valore massimo di aspirazione        | -950 mbar (-722 mm Hg)                                  |
| Valore massimo di portata            | 42 LPM nelle condizioni consigliate                     |
| Intervallo massimo della graduazione | 50 ml                                                   |
| Dimensione del tubo paziente         | minimo Ø 6x9 mm (consigliato Ø 8x11 mm L=2.5 m massimo) |
| Dimensione del tubo di alimentazione | minimo Ø 6x9 mm (consigliato Ø 8x11 mm L=1.8 m massimo) |

## FILTRO per SACCA FLOVAC® - CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Capacità di filtrazione (tipica) | >99.999995% con particelle di 0.1µ       |
| Membrana                         | GORE™ Medical Membrane PTFE 100% espanso |
| Materiale del prefiltra          | microfibra di vetro                      |
| Supporto                         | tessuto non tessuto di PE/PES            |



## FLOVAC® LINER MONOUSO

|                  | NEW ASPIRET<br>NEW ASKIR 20<br>NEW ASKIR 30<br>NEW ASKIR 230 12V BR<br>ASKIR 36 BR | ASKIR C30<br>ASKIR C30 BR | NEW<br>HOSPIVAC 350<br>HOSPIVAC 400 | Per<br>VUOTO<br>CENTRALIZZATO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Liner da 1000 ml | 31848                                                                              |                           |                                     | 31845                         |
| Liner da 2000 ml | 31846                                                                              | 31846                     | 31846                               | 31846                         |
| Liner da 3000 ml |                                                                                    |                           | 31847                               | 31847                         |



## FLOVAC® VASI RIUTILIZZABILI


|                 | NEW ASPIRET<br>NEW ASKIR 20<br>NEW ASKIR 30<br>NEW ASKIR 230 12V BR<br>ASKIR 36 BR | ASKIR C30<br>ASKIR C30 BR | NEW<br>HOSPIVAC 350<br>HOSPIVAC 400 | Per<br>VUOTO<br>CENTRALIZZATO |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Vaso da 1000 ml | 31843**                                                                            |                           |                                     | 31840                         |
| Vaso da 2000 ml | 31841                                                                              | 31841                     | 31841                               | 31841                         |
| Vaso da 3000 ml |                                                                                    |                           | 31842                               | 31842                         |

\*\* nella serie ASKIR è necessario il distanziatore SP.0220 fornito a parte



## FLOVAC® SET di TUBI

|                                                                                                         | NEW ASPIRET<br>NEW ASKIR 20<br>NEW ASKIR 30<br>NEW ASKIR 230 12V BR | ASKIR 36 BR<br>ASKIR C30<br>ASKIR C30 BR | NEW<br>HOSPIVAC 350<br>HOSPIVAC 400 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Set composto da:<br>Tubo 6x10mm lungo 140cm<br>Tubo 6x10mm lungo 26cm<br>Connettore conico Ø 8-9-10mm   | SP. 0158/01                                                         |                                          |                                     |
| Set composto da:<br>Tubo 8x14mm lungo 150cm<br>Tubo 8x14mm lungo 34cm<br>Connettore conico Ø 10-11-12mm |                                                                     | SP. 0160/01                              | SP. 0160/01                         |
| Connettore maschio giallo<br>(sacchetto da 5 pz.)                                                       | SP. 0223                                                            | SP. 0223                                 | SP. 0223                            |

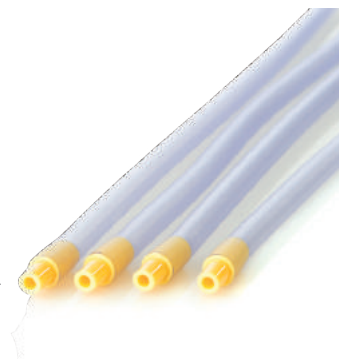

## FLOVAC® SACCHE MONOUSO CON TUBO

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| SACCA da 1000 ml + TUBO lungo 1.8 m | 000036030 |
| SACCA da 2000 ml + TUBO lungo 1.8 m | 000036031 |
| SACCA da 3000 ml + TUBO lungo 1.8 m | 000036032 |

## FLOVAC® SACCHE MONOUSO CON TUBO e VACUUM STOP

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| SACCA da 1000 ml + TUBO di 1.8 m + vacuum stop | 000036050 |
| SACCA da 2000 ml + TUBO di 1.8 m + vacuum stop | 000036051 |
| SACCA da 3000 ml + TUBO di 1.8 m + vacuum stop | 000036052 |

Kit con utilizzo di una polvere da incapsulamento che oltre ad una efficace azione germicida trasforma i liquidi in una massa semisolido rendendo più sicuro il lavoro del personale sanitario addetto alla pulizia e allo smaltimento. Il colore BLU è esemplificativo per evidenziare il contenuto.

## FLOVAC® SACCHE MONOUSO CON POLVERE GELIFICANTE

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| SACCA da 1000 ml + busta gelificante | 31854    |
| SACCA da 2000 ml + busta gelificante | 31855    |
| SACCA da 3000 ml + busta gelificante | 31856    |
| SACCA da 1000 ml + busta gelificante | 31858 ** |

\*\* Sacca compatibile solo con il Vaso REF RE 31843

## FLOVAC® VASI MONOUSO CANISTER

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Canister da 1000 ml                               | 000036000 |
| Canister da 2000 ml                               | 000036001 |
| Canister da 3000 ml                               | 000036002 |
| Canister da 1000 ml + TUBO lungo 1.8 m            | 000036020 |
| Canister da 2000 ml + TUBO lungo 1.8 m            | 000036021 |
| Canister da 3000 ml + TUBO lungo 1.8 m            | 000036022 |
| Canister da 1000 ml + TUBO di 1.8 m + vacuum stop | 000036040 |
| Canister da 2000 ml + TUBO di 1.8 m + vacuum stop | 000036041 |
| Canister da 3000 ml + TUBO di 1.8 m + vacuum stop | 000036042 |

Vaso in polycarbonato quando agganciato al coperchio, diventa un contenitore ermetico completo da smaltire dopo l'uso. I bicchieri presentano una scala graduata che permette un facile monitoraggio del volume di fluido aspirato.



|                                                                                                                 |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| ANELLO di supporto per vasi FLOVAC® con Slitta da 25x5                                                          | 970010210 | 1  |
| ANELLO di supporto per vasi FLOVAC® con Slitta da 30x5                                                          | 970010220 |    |
| ANELLO di supporto per vasi FLOVAC® con Slitta da 41x4 (adatto anche per BAXTER da parete)                      | 970010214 |    |
| ANELLO di supporto per vasi FLOVAC® con Slitta da 45x5 (adatto anche per ABBOT da parete)                       | 970010215 |    |
| RUBINETTO senza vuotometro ON-OFF per fissaggio sull'anello di supporto del contenitore FLOVAC®                 | 000010057 | 2  |
| RUBINETTO con vuotometro ON-OFF per fissaggio sull'anello di supporto del contenitore FLOVAC®                   | 000010056 |    |
| SLITTA MURALE in plastica da 25x5                                                                               | 920200004 | 3  |
| SLITTA MURALE in plastica da 30x5                                                                               | 920200029 |    |
| SLITTA MURALE in plastica da 45x5                                                                               | 920200477 |    |
| MORSETTO metallo cromato per barra da 30x10 per gancio da 25x5                                                  | 000230000 | 4  |
| MORSETTO in tecnopolimero per barra 30x10 per gancio da 25x5                                                    | 000230500 |    |
| Carrello a 4 posti per contenitore FLOVAC® con 4 anelli di supporto, rubinetti ON-OFF e vuotometro di controllo | 000260950 | 5  |
| Carrello a 4 posti per contenitore FLOVAC® con 4 anelli di supporto, rubinetti ON-OFF e regolatore di vuoto     | 000260955 |    |
| Carrello a 4 posti per contenitore FLOVAC® con 4 anelli di supporto e maniglia                                  | 000260953 |    |
| Carrello a 2 posti per contenitore FLOVAC® con 2 anelli di supporto, rubinetti ON-OFF e vuotometro di controllo | 000260951 |    |
| Carrello a 2 posti per contenitore FLOVAC® con 2 anelli di supporto, rubinetti ON-OFF e regolatore di vuoto     | 000260956 |    |
| Carrello a 2 posti per contenitore FLOVAC® con 2 anelli di supporto e maniglia                                  | 000260954 | 6  |
| Tubo ø 7,5x11,2 - L=0,38 m. per connessioni TANDEM (confezioni da 50 pz.)                                       | 970010120 |    |
| Lancia di aspirazione monouso VACUUM-STOP (confezioni da 50 pz.)                                                | 000320000 | 7  |
| Tubo ø 6,0x9,0 - L=1,8 m. con lancia di aspirazione monouso VACUUM-STOP (confezioni da 100 pz.)                 | 000320010 | 8  |
| Contenitore particellare (confezioni da 10 pz.)                                                                 | 000036100 | 9  |
| POLVERE GELIFICANTE per tutte le misure di CANISTER FLOVAC® (confezioni da 50 pz.)                              | 000036150 | 10 |



## FISSAGGIO MURALE



AFNOR NF-S 90-116



UNI 9507

AFNOR NF-S 90-116  
EASYFIXEASYVAC PLUS  
EASYVAC PLUS  
EASYVAC PLUSCOD.: 000551000  
COD.: 000551001  
COD.: 000551002

Ø 6.3x13.5 mm

TUBO  
ANTISCHIACCIAMENTO

## FISSAGGIO A BARRA

INNESTI A  
PORTAGOMMAAFNOR  
NF-S 90-116  
EASYFIX

UNI 9507

MORSETTI  
PER BARRA  
MURALEMORSETTO IN ALLUMINIO  
per barra 50x10mmMORSETTO IN  
TECNOPOLIMERO per  
barra 30x10mmMORSETTO IN METALLO  
CROMATO per barra  
30x10mm

## FISSAGGIO MURALE

## INNESTI MURALI CON ATTACCO FILETTATO

Innesto tipo AFNOR NF-S 90-116 Posizionabile con filetto ISO G. 1/4" F.

VR-WM-1

Innesto tipo AFNOR NF-S 90-116 EASYFIX con filetto ISO G. 1/4" F.

VR-WM-2

Innesto tipo UNI 9507 con filetto ISO G. 1/4" F.

VR-WM-3

## FISSAGGIO A BARRA

## TUBO ANTISCHIACCIAMENTO conforme allo standard EN ISO 5359

Ø 6,3x13,5 mm - Lunghezza 1,5 m

VR-RM-A-1

Ø 6,3x13,5 mm - Lunghezza 1 m

VR-RM-A-2

## INNESTI MURALI A PORTAGOMMA

Innesto tipo AFNOR NF-S 90-116 EASYFIX, portagomma Ø 7,5 mm

VR-RM-B-1

Innesto tipo UNI 9507, portagomma Ø 7,5 mm

VR-RM-B-2

## MORSETTI PER BARRA MURALE

Morsetto in alluminio per barra 50x10mm, con filetto ISO G. 1/4" F. e portagomma Ø 7,5mm

VR-RM-C-1

Morsetto in tecnopolimero per barra 30x10mm, con filetto ISO G. 1/4" F. e portagomma Ø 7,5mm

VR-RM-C-2

Morsetto in metallo cromato per barra 30x10mm, con filetto ISO G. 1/4" F. e portagomma Ø 7,5mm

VR-RM-C-3

I sistemi di montaggio possono essere selezionati dalla tabella soprastante, in conformità alle esigenze del cliente.

Qualsiasi configurazione richiesta sarà fornita con Regolatori di Vuoto\* e sistemi di montaggio\* selezionati preassemblati.

\* Prodotti distribuiti per conto di Flow Meter SpA **CE 0546**



Vasetto di raccolta EASYSAFE PLUS

Il nuovo vasetto di sicurezza EASYSAFE PLUS è un dispositivo medico studiato e prodotto per applicazioni di “alto flusso e alto vuoto”. Progettato per l’uso con la gamma dei regolatori di vuoto, il EASYSAFE PLUS è utilizzato per proteggere l’apparecchiatura di generazione del vuoto o l’impianto ospedaliero a monte, nel caso di malfunzionamento della valvola di troppo pieno del vaso di raccolta primario. Prodotto in polisulfone, materiale ad alta resistenza, il vasetto di sicurezza EASYSAFE PLUS è autoclavabile (134°C – 18 min) ed è corredato di una valvola di troppo pieno a galleggiante e di un alloggiamento per filtro antibatterico (opzionale), per garantire una protezione completa del sistema di aspirazione contro qualsiasi contaminazione. La connessione ad aggancio rapido facilita il montaggio e la rimozione dai regolatori vuoto.

000552000



|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                            | 75x90x70 mm                                                   |
| Peso                                  | 0,08 Kg                                                       |
| Connessione alla fonte di aspirazione | aggancio rapido per regolatore di vuoto VR                    |
| Connessione al paziente               | portagomma Ø 8,0÷9,2 mm                                       |
| Valore massimo di vuoto applicabile   | -950 mbar / 5 min                                             |
| Valore massimo di portata             | 60 L/min. ±10 L/min. a -950 mbar (senza filtro antibatterico) |

Vasi di raccolta per piccoli volumi MAK 300 e MAK 500

MAK 300



MAK 500



I vasi di raccolta modello MAK 300 e MAK 500 sono progettati per applicazioni in aspirazione e favoriscono la raccolta dei fluidi organici aspirati in condizioni di “alto flusso e alto vuoto”. Particolarmente adatti per la raccolta di piccoli volumi (versioni disponibili con capacità di 300 ml e 500 ml), i vasi di raccolta sono realizzati con coperchio standard o con coperchio predisposto per l’alloggiamento di un filtro antibatterico (opzionale). Oltre a questa applicazione, questi dispositivi sono normalmente utilizzati come contenitori di sicurezza per proteggere l’apparecchiatura di generazione del vuoto o l’impianto ospedaliero a monte, in caso di malfunzionamento del vaso di raccolta primario. Realizzati in policarbonato con raccorderia in ottone cromato, i vasi di raccolta EASYSAFE PLUS sono dotati di una ghiera di ingresso filettata ad avvitamento manuale in policarbonato e di un portagomma di uscita, hanno una valvola di troppo pieno di tipo meccanico a galleggiante e sono autoclavabili (121°C – 15 min). In abbinamento ai regolatori di vuoto, garantiscono semplicità di utilizzo, versatilità ed economia.

|                              |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Volume interno               | 300 ml                    | 500 ml                    |
| Dimensioni (AxLxP)           | 180 x 98 x 70 mm          | 215 x 98 x 70 mm          |
| Peso                         | 0.20 Kg                   | 0.21 Kg                   |
| Depressione di alimentazione | max -950 mbar             | max -950 mbar             |
| Valvola di troppo pieno      | a galleggiante            | a galleggiante            |
| Connessione di entrata       | ISO G 1/2" F.             | ISO G 1/2" F.             |
| Connessione di uscita        | portagomma Ø 8.0 ÷ 9.2 mm | portagomma Ø 8.0 ÷ 9.2 mm |

PORTAGOMMA | CESTELLO | BARRA

REF 002004

Portagomma CA-MI per connessione diretta



920200418

CESTELLO per VASO autoclavabile da 4000 ml



000000072


lunghezza 1,00 m

000000054

lunghezza 1,50 m

BARRA A MURO in acciaio inox 30 x 10 disponibile in due lunghezze:



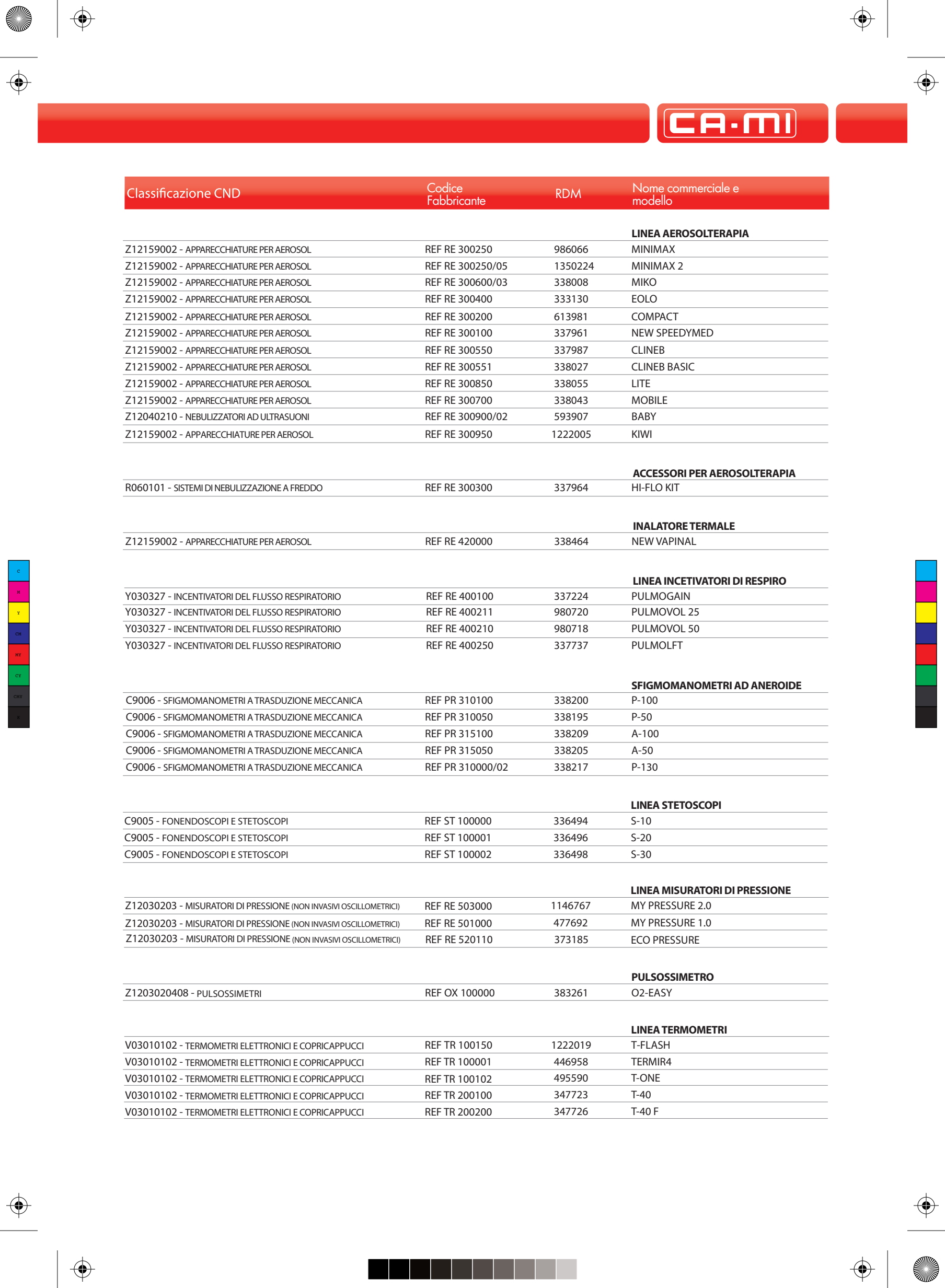

| Classificazione CND | Codice<br>Fabbricante | RDM | Nome commerciale e<br>modello |
|---------------------|-----------------------|-----|-------------------------------|
|---------------------|-----------------------|-----|-------------------------------|

|                                         |                  |         |               |
|-----------------------------------------|------------------|---------|---------------|
| LINEA AEROSOLTERAPIA                    |                  |         |               |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300250    | 986066  | MINIMAX       |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300250/05 | 1350224 | MINIMAX 2     |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300600/03 | 338008  | MIKO          |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300400    | 333130  | EOLO          |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300200    | 613981  | COMPACT       |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300100    | 337961  | NEW SPEEDYMED |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300550    | 337987  | CLINEB        |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300551    | 338027  | CLINEB BASIC  |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300850    | 338055  | LITE          |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300700    | 338043  | MOBILE        |
| Z12040210 - NEBULIZZATORI AD ULTRASUONI | REF RE 300900/02 | 593907  | BABY          |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 300950    | 1222005 | KIWI          |

|                                              |               |        |            |
|----------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| ACCESSORI PER AEROSOLTERAPIA                 |               |        |            |
| R060101 - SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE A FREDDO | REF RE 300300 | 337964 | HI-FLO KIT |

|                                         |               |        |             |
|-----------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| INALATORE TERMALE                       |               |        |             |
| Z12159002 - APPARECCHIATURE PER AEROSOL | REF RE 420000 | 338464 | NEW VAPINAL |

|                                                 |               |        |             |
|-------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| LINEA INCETIVATORI DI RESPIRO                   |               |        |             |
| Y030327 - INCENTIVATORI DEL FLUSSO RESPIRATORIO | REF RE 400100 | 337224 | PULMOGAIN   |
| Y030327 - INCENTIVATORI DEL FLUSSO RESPIRATORIO | REF RE 400211 | 980720 | PULMOVOL 25 |
| Y030327 - INCENTIVATORI DEL FLUSSO RESPIRATORIO | REF RE 400210 | 980718 | PULMOVOL 50 |
| Y030327 - INCENTIVATORI DEL FLUSSO RESPIRATORIO | REF RE 400250 | 337737 | PULMOLFT    |


|                                                 |                  |        |       |
|-------------------------------------------------|------------------|--------|-------|
| SFIGMOMANOMETRI AD ANEROIDE                     |                  |        |       |
| C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA | REF PR 310100    | 338200 | P-100 |
| C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA | REF PR 310050    | 338195 | P-50  |
| C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA | REF PR 315100    | 338209 | A-100 |
| C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA | REF PR 315050    | 338205 | A-50  |
| C9006 - SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA | REF PR 310000/02 | 338217 | P-130 |

|                                   |               |        |      |
|-----------------------------------|---------------|--------|------|
| LINEA STETOSCOPI                  |               |        |      |
| C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI | REF ST 100000 | 336494 | S-10 |
| C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI | REF ST 100001 | 336496 | S-20 |
| C9005 - FONENDOSCOPI E STETOSCOPI | REF ST 100002 | 336498 | S-30 |

|                                                                   |               |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| LINEA MISURATORI DI PRESSIONE                                     |               |         |                 |
| Z12030203 - MISURATORI DI PRESSIONE (NON INVASIVI OSCILLOMETRICI) | REF RE 503000 | 1146767 | MY PRESSURE 2.0 |
| Z12030203 - MISURATORI DI PRESSIONE (NON INVASIVI OSCILLOMETRICI) | REF RE 501000 | 477692  | MY PRESSURE 1.0 |
| Z12030203 - MISURATORI DI PRESSIONE (NON INVASIVI OSCILLOMETRICI) | REF RE 520110 | 373185  | ECO PRESSURE    |

|                             |               |        |         |
|-----------------------------|---------------|--------|---------|
| PULSOSSIMETRO               |               |        |         |
| Z1203020408 - PULSOSSIMETRI | REF OX 100000 | 383261 | O2-EASY |

|                                                    |               |         |         |
|----------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| LINEA TERMOMETRI                                   |               |         |         |
| V03010102 - TERMOMETRI ELETTRONICI E COPRICAPPUCCI | REF TR 100150 | 1222019 | T-FLASH |
| V03010102 - TERMOMETRI ELETTRONICI E COPRICAPPUCCI | REF TR 100001 | 446958  | TERMIR4 |
| V03010102 - TERMOMETRI ELETTRONICI E COPRICAPPUCCI | REF TR 100102 | 495590  | T-ONE   |
| V03010102 - TERMOMETRI ELETTRONICI E COPRICAPPUCCI | REF TR 200100 | 347723  | T-40    |
| V03010102 - TERMOMETRI ELETTRONICI E COPRICAPPUCCI | REF TR 200200 | 347726  | T-40 F  |

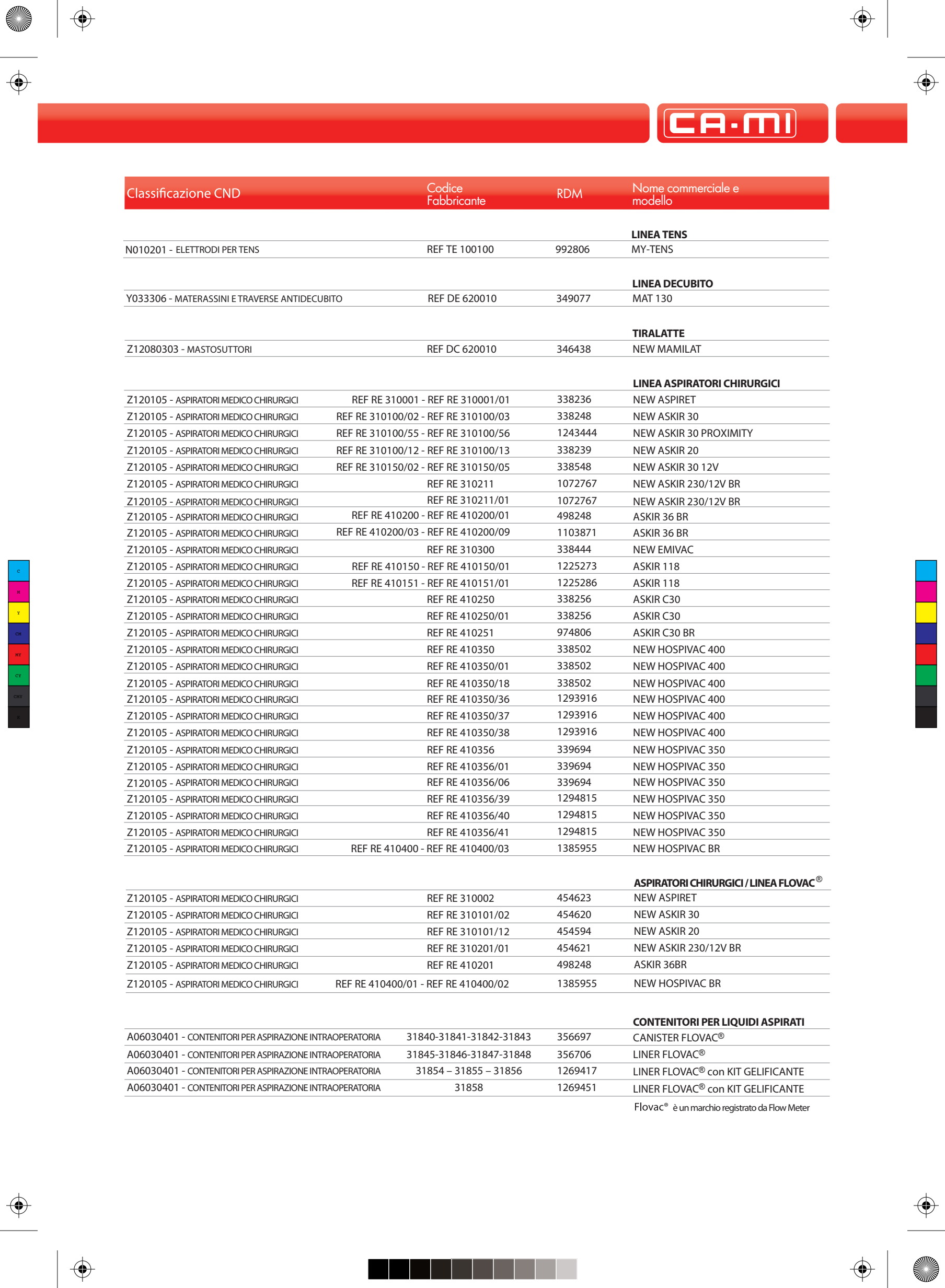

| Classificazione CND                                     | Codice<br>Fabbricante               | RDM     | Nome commerciale e<br>modello     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>LINEA TENS</b>                                       |                                     |         |                                   |
| N010201 - ELETTRODI PER TENS                            | REF TE 100100                       | 992806  | MY-TENS                           |
| <b>LINEA DECUBITO</b>                                   |                                     |         |                                   |
| Y033306 - MATERASSINI E TRAVERSE ANTIDECUBITO           | REF DE 620010                       | 349077  | MAT 130                           |
| <b>TIRALATTE</b>                                        |                                     |         |                                   |
| Z12080303 - MASTOSUTTORI                                | REF DC 620010                       | 346438  | NEW MAMILAT                       |
| <b>LINEA ASPIRATORI CHIRURGICI</b>                      |                                     |         |                                   |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310001 - REF RE 310001/01    | 338236  | NEW ASPIRET                       |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310100/02 - REF RE 310100/03 | 338248  | NEW ASKIR 30                      |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310100/55 - REF RE 310100/56 | 1243444 | NEW ASKIR 30 PROXIMITY            |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310100/12 - REF RE 310100/13 | 338239  | NEW ASKIR 20                      |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310150/02 - REF RE 310150/05 | 338548  | NEW ASKIR 30 12V                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310211                       | 1072767 | NEW ASKIR 230/12V BR              |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310211/01                    | 1072767 | NEW ASKIR 230/12V BR              |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410200 - REF RE 410200/01    | 498248  | ASKIR 36 BR                       |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410200/03 - REF RE 410200/09 | 1103871 | ASKIR 36 BR                       |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310300                       | 338444  | NEW EMIVAC                        |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410150 - REF RE 410150/01    | 1225273 | ASKIR 118                         |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410151 - REF RE 410151/01    | 1225286 | ASKIR 118                         |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410250                       | 338256  | ASKIR C30                         |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410250/01                    | 338256  | ASKIR C30                         |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410251                       | 974806  | ASKIR C30 BR                      |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410350                       | 338502  | NEW HOSPIVAC 400                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410350/01                    | 338502  | NEW HOSPIVAC 400                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410350/18                    | 338502  | NEW HOSPIVAC 400                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410350/36                    | 1293916 | NEW HOSPIVAC 400                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410350/37                    | 1293916 | NEW HOSPIVAC 400                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410350/38                    | 1293916 | NEW HOSPIVAC 400                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410356                       | 339694  | NEW HOSPIVAC 350                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410356/01                    | 339694  | NEW HOSPIVAC 350                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410356/06                    | 339694  | NEW HOSPIVAC 350                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410356/39                    | 1294815 | NEW HOSPIVAC 350                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410356/40                    | 1294815 | NEW HOSPIVAC 350                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410356/41                    | 1294815 | NEW HOSPIVAC 350                  |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410400 - REF RE 410400/03    | 1385955 | NEW HOSPIVAC BR                   |
| <b>ASPIRATORI CHIRURGICI / LINEA FLOVAC®</b>            |                                     |         |                                   |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310002                       | 454623  | NEW ASPIRET                       |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310101/02                    | 454620  | NEW ASKIR 30                      |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310101/12                    | 454594  | NEW ASKIR 20                      |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 310201/01                    | 454621  | NEW ASKIR 230/12V BR              |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410201                       | 498248  | ASKIR 36BR                        |
| Z120105 - ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI                  | REF RE 410400/01 - REF RE 410400/02 | 1385955 | NEW HOSPIVAC BR                   |
| <b>CONTENITORI PER LIQUIDI ASPIRATI</b>                 |                                     |         |                                   |
| A06030401 - CONTENITORI PER ASPIRAZIONE INTRAOPERATORIA | 31840-31841-31842-31843             | 356697  | CANISTER FLOVAC®                  |
| A06030401 - CONTENITORI PER ASPIRAZIONE INTRAOPERATORIA | 31845-31846-31847-31848             | 356706  | LINER FLOVAC®                     |
| A06030401 - CONTENITORI PER ASPIRAZIONE INTRAOPERATORIA | 31854 - 31855 - 31856               | 1269417 | LINER FLOVAC® con KIT GELIFICANTE |
| A06030401 - CONTENITORI PER ASPIRAZIONE INTRAOPERATORIA | 31858                               | 1269451 | LINER FLOVAC® con KIT GELIFICANTE |

Flovac® è un marchio registrato da Flow Meter

CA-MI

# Italian Medical Touch



CM002.REV8 - EDIZIONE MARZO 2017

CA-MI srl | Via Ugo La Malfa, 13 - 43010 Pilastro (PR) - Italia | Tel. +39 0521 637133 - 631138 FAX +39 0521 639041 | vendite@ca-mi.it - export@ca-mi.it | www.ca-mi.it